


ADAPTIC[®]

アダプティック*ドレッシング

Non-Adhering Dressing



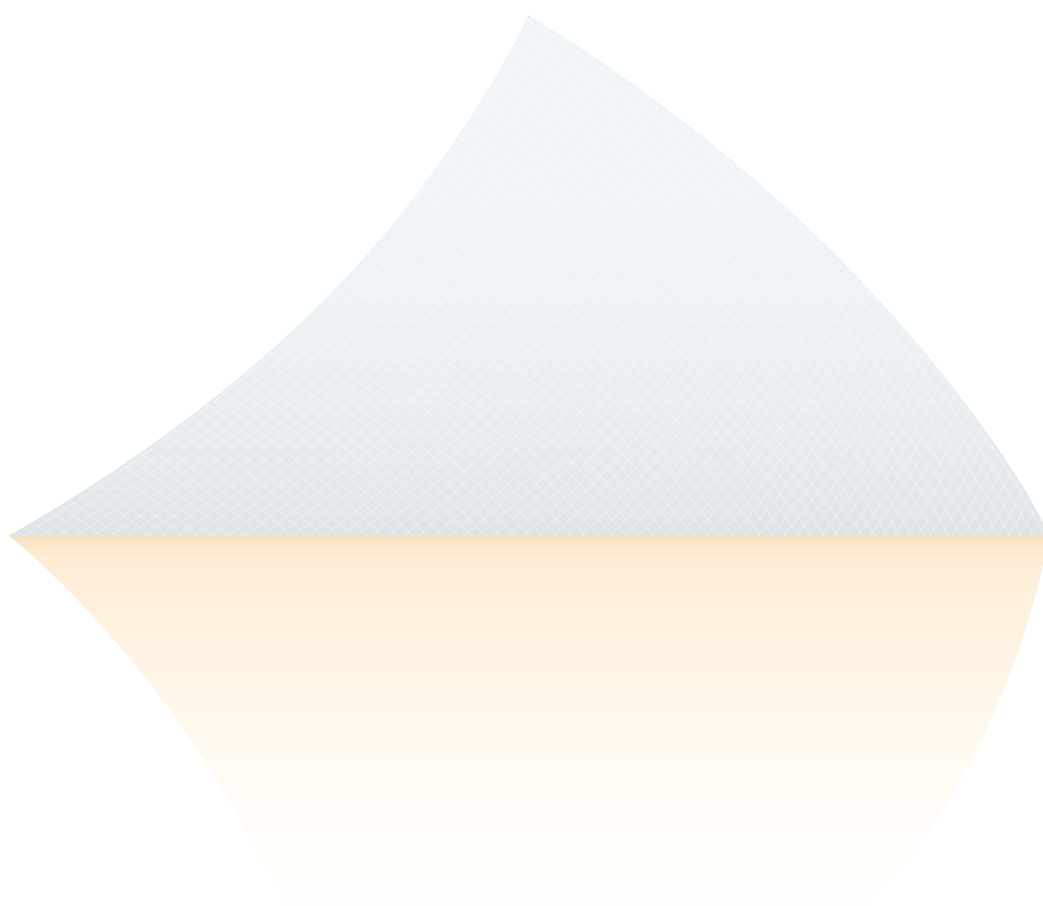

傷口に貼りつかない アダプティック*ドレッシングなら、 もうガーゼ交換はこわくない。


“ガーゼ交換時の痛みを極力減らしてリン(またはシリコン)をコーティングする新生組織の損傷や患者さんの苦痛傷処置のドレッシングとして、豊富な

あげたい”という願いから生まれた「アダプティック*ドレッシング」は、100%セルロースで編まれた繊維にワセリンした非固着性ガーゼ。剥離性がよいため、ガーゼ交換のとき傷口に貼りつかず、繊維を残しません。包帯交換による抑え、傷をやさしく守りながら治癒環境を維持します。熱傷、擦過傷、縫合創などをはじめとする皮膚科処置や創サイズ・形状を揃えました。

だからやさしい、だから痛くない アダプティック*ドレッシング (ワセリンコーティング)

傷口に貼りつきません

ワセリンを均等にコーティングしているので、傷口に固着せず、また、創傷面に繊維を残しません。そのため、ガーゼ交換時の痛みが少なく、着脱が容易に行えます。

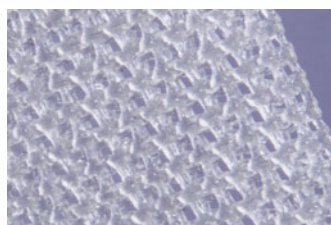

非固着性のワセリンコーティング

べとつきを抑え、扱いやすくしました

ガンマ線滅菌済みですから、取り出して直ちにそのまま使用できます。べとつきを抑えてあるため扱いやすく、すみやかにガーゼ交換が行えます。



べとつきがなく処置もスムーズ

浸軟のリスクを低減させます

アセテートセルロース(レーヨン)メッシュの均一な小孔が、血液・浸出液等を速やかに透過させるため、創傷面の浸軟のリスクを低減させます。

傷口に合うサイズ・形状をお選びいただけます

豊富なサイズバリエーションをご用意しています。創傷部に合うサイズを選ぶだけで切らずにそのまま使えるため、扱いが容易で衛生的です。また、カットやトリミングをしてもほつれず糸くずが出ません。

適用例：熱傷、採皮創、皮膚移植、擦過傷、褥瘡、縫合創、感染創、裂創 他

手指・足指をやさしくすっぽり守る フィンガー/トー ドレッシング (シリコンコーティング)



ガーゼドレッシングと包帯を一体化しました

アダプティック*非固着性ガーゼと2層の筒状包帯とが一体となっている、手指・足指専用のドレッシングです。オール・イン・ワン構造により、装着が容易なうえ指の屈曲等を妨げません。

指の太さに合わせてお選びいただけます

ガンマ線滅菌済みですから、取り出して直ちに使用可能です。指趾のサイズに合わせて適切なサイズをご使用いただけるよう、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。

やさしく保護し、しっかり固定します

フィンガー/トー ドレッシングの非固着性ガーゼには、やや粘性のあるシリコンをコーティングしてあるため、指趾に装着しやすく滑り落ちにくい特長を持っています。また、2層構造の筒状包帯により、優しく保護・しっかり固定します。

フィンガー/トー ドレッシングの装着方法



1 創傷部の指の太さ、長さに合わせて適当なサイズを選択。アダプティック*ガーゼより支持体をはがす。

2 創傷部を消毒および処置した後、アダプティック*ガーゼで創傷部を覆う。

3 1層目の包帯を被せ、続いて2層目の包帯で固定・保護する。

創傷部はアダプティック*ガーゼで覆います
創傷部は透過性のよい非固着性ガーゼでやさしく覆うため、傷口に貼りつかず、交換時の痛みを抑えます。

適用例：指尖損傷、陥入爪や巻き爪の術後、抜爪、熱傷 他

●使用上の注意

1. 一般的注意

- 1) 本品を使用中に皮膚障害やその他の異常が見られた場合は、使用を中止して下さい。
- 2) 臨床的に明らかな感染の兆候が見られる場合は、本品の使用を中止して下さい。
※ この場合、適切な処置を行い、感染の問題が解決してから使用を再び始めて下さい。

2. 適用上の注意

- 1) 大きな創傷では、本品を重ねて貼付しても使用できます。
- 2) 小さな創傷では、本品をカットして使用できます。

- 3) 本品を取り除く際は、ゆっくりと剥がして下さい。

3. 取扱い上の注意

- 1) 包装が破損または汚損している場合は使用しないで下さい。
- 2) 開封後の未使用品は廃棄し、再滅菌しないで下さい。
- 3) 本品はディスポーザブルですので1回限りの使用とし、再使用しないで下さい。


4. 貯法

高温多湿を避け、室温で保存して下さい。

●規 格 アダプティック*ドレッシング

	品番	種類	サイズ		1 箱入数	1 ケース入数	
アダプティック ドレッシング	514010	2012	7.6cm × 7.6cm	(3 インチ × 3 インチ)	50枚	12箱	600枚
	514011	2013	7.6cm × 20.3cm	(3 インチ × 8 インチ)	36/パック*	6箱	216/パック*
	514012	2014	7.6cm × 40.6cm	(3 インチ × 16 インチ)	36枚	6箱	216枚
	514013	2015	7.6cm × 20.3cm	(3 インチ × 8 インチ)	24枚	6箱	144枚
	514014	2018	7.6cm × 152.4cm	(3 インチ × 60 インチ)	—	10巻	—
フィンガー/トー ドレッシング	514015	2019	12.7cm × 22.9cm	(5 インチ × 9 インチ)	12枚	6箱	72枚
	514050	MAD003JP	S 直径 2.0cm	2.0cm× 7.6cm	10コ	2箱	20コ
	514051	MAD013JP	M 直径 2.4cm	3.0cm×12.7cm	10コ	2箱	20コ
	514052	MAD023JP	L 直径 2.8cm	3.0cm×12.7cm	10コ	2箱	20コ
	514053	MAD042JP	XL 直径 3.0cm	3.0cm×12.7cm	10コ	2箱	20コ
	514054	MAD062JP	趾L 直径 2.8cm	4.0cm× 7.6cm	10コ	2箱	20コ

※品番「514011」は、1/パック3枚入りとなります。

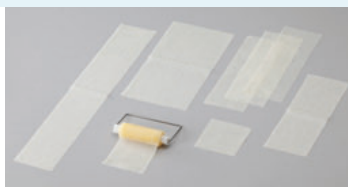

保険適用

- 種 類：特定保険医療材料
- 保険請求名：非固着性シリコンガーゼ（アダプティック*ドレッシング）
(1) 広範囲熱傷用 (2) 平坦部位用 (3) 凹凸部位用
- 保険請求方法：公定価格による保険償還

- 販売 名：アダプティック*ドレッシング
- 一般的名称：非固着性創傷被覆・保護材 (JMDNコード：11325000)
- 医療機器分類：管理医療機器(クラスⅡ)
- 医療機器認証番号：225ADBZ100114000
- 製造販売元：株式会社エムビーエス
- 滅菌方法：ガンマ線滅菌

販売元

日本シグマックス株式会社

本 社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3200

- 北海道営業所：〒060-0806 札幌市北区北6条西1-4-2 TEL.011(738)5881
- 東北営業所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 TEL.022(298)0871
- 北関東営業所：〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-169-2 TEL.048(657)3950
- 東日本営業所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3210
- 南関東営業所：〒231-0023 横浜市中区山下町51-1 TEL.045(663)0261
- 中部営業所：〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 TEL.052(219)0851
- 西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 TEL.06(6398)0290
- 中国営業所：〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 TEL.082(264)4701
- 四国営業所：〒790-0005 松山市花園町3-21 TEL.089(933)5515
- 九州営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-1 TEL.092(474)7821

※本製品に関するお問い合わせは、最寄りの各営業所までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書、または添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。