




ファシリエイド サポーター FACILIAID SUPPORTER

ファシリエイドサポーターシリーズ〈総合カタログ〉

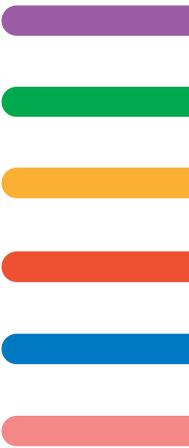

ファシリエイド サポーター

FACILIAID
SUPPORTER

facilitate + aid = Faciliaid

ファシリエイドとは
英語で「促進する」「容易にする」を表すfacilitateと
「助ける」という意味のaidとを組み合わせた
日本シグマックスのオリジナル名称です。

疾患や症状としっかりと寄り添い、
一日でも早く日常を取り戻すための支えになりたい。
そんな思いから生まれたのが
「ファシリエイドサポーター」です。

豊富なラインナップで
身体をしっかりサポート

肩

肩を優しく包みこみ、
安静保持と保温。



ひじ

簡単に装着でき、
適度な圧迫で
肘をサポート。



手くび

手関節の掌屈、
背屈の動きを
制限し、
手関節を
安静保持、
サポート。



母指

片手で簡単に
装着できる
母指用
サポーター。



膝ショート

軽度膝OAなどの
膝関節疾患に、
簡単に
装着できる
サポーター。



ひざ保温

膝関節の保温に。



アキレス腱

腱とかかとの
安定感を高め、
アキレス腱を
サポート。



足くび

テーピング理論で、
足関節を
圧迫・保護する
サポーター。



足くびマルチ

軽度の内反動揺性、
前方動揺性に
対応した
汎用性の
ある足関節
サポーター。



肩を優しく包みこみ、 安静保持と保温。

使用用途

肩関節のサポート

肩関節周囲炎をはじめとした
様々な肩痛に対し、
一人でも楽に装着できる
簡便なサポーターです。

特長
1



肩関節を
しっかり
サポート!



薄く、フィット性のある本体素材
が肩関節をサポートします。

特長
2



着脱機構の工夫により、
サポート力の調節が可能です。

サポーターと本体ストラップや、ショルダー
フラップにより、サポート力の調節が可能です。

POINT!



ショルダーフラップをと
める際に腕を引き上げな
がらとめることで、肩関
節にかかる負担を軽減で
きます。

特長
3



本体サポーターが肩関節を
包み込むように覆うことで、
肩関節を保温します。

POINT!



ショルダーフラップと本体サポーターの
間に、使い捨てカイロを挿入できます。
※使い捨てカイロを併用される場合は、使い捨てカイロ
の取扱説明書に従って安全にご使用ください。

装着完了時(右肩の場合)



〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲(肩の付け根の太さ)	1箱入数	価格(本体価格)
302301	S	34cm~41cm	1コ	¥2,980
302302	M	41cm~48cm		
302303	L	48cm~55cm		

●サイズの選び方



肩の付け根の太さに合わせて選んで
ください。肩の付け根の太さは腕の
力を抜いた状態で肩峰と腋下を通る
周径を計測してください。計測値が2
サイズのさかいになった場合は、大
きい方のサイズを選んでください。

簡単に装着でき 適度な圧迫で、肘をサポート。

使用用途

肘のサポート

特長
1

適度な硬さを持つパッドが、
腱附着部を程よく圧迫します。

特長
2

輪状にした本体に腕を通して
面ファスナーをとめるだけ。
片手でも簡単に装着できる形状です。

特長
3

ストラップの端に膨らみを
持たせてあるので、
小カンから外れにくくなっています。

特長
4

洗えるので、何度でも
清潔にご使用になれます。

特長
5

様々な腕の太さに対応できる
フリーサイズです。

装着手順

STEP.1

通す



STEP.2

巻く



STEP.3

とめる




肘をサポート

〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲(前腕周囲)	1袋入数	1箱入数	価格(本体価格)
302601	フリーサイズ	19cm~31cm	1コ	5袋	¥5,000 (1袋:¥1,000)

●計測の方法

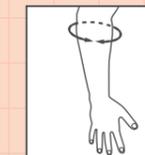

腕の力を抜いた状態で、前腕の一番
太い部分の周径を計測してください。

手関節の掌屈、背屈の動きを制限し、手関節を安静保持、サポート。

使用用途 手くびのサポート



特長 1 手のひら側と甲側にアルミ製のステーを配置し、手関節を固定、良肢位保持します。



手のひら側ステー
母指CM関節とMP関節の動きを妨げない形状で、良肢位保持とフィット性を高めるよう予め曲げています。



甲側ステー
手のひら側ステーとペアでステーを配置することで、支持力を向上させます。



左右兼用
手のひら側ステー、甲側ステーとも取り外し可能。ステーを入れ替えて使用することで左右両方に使用できます。

特長 2 片手で簡単装着



STEP 1 手を通してストラップをとめるだけなので、片手で装着できます。



ストラップにストッパーがついているので抜けにくく、ストラップが締めやすい構造です。

特長 3




立体メッシュ生地を使用。ムレにくく快適な装着感。フィット感のよいソフトな肌触りの生地を使用しています。

特長 4

洗濯可能
アルミ製のステーには濡れても錆びにくい加工を施しているため、汚れても丸ごと洗濯できます。

ステーの挿入について

本品は手のひら側ステー、甲側ステーが付属していますが、納品時はステーが製品に挿入されておりません。装着される手の左右に応じて、ステーの挿入をお願いいたします。

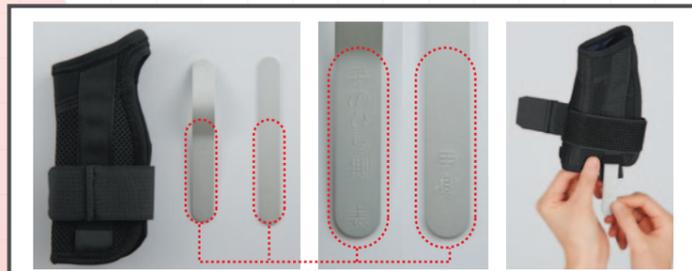

患者様に処方される際に手のひら側ステー、甲側ステーの挿入をお願いいたします。挿入方法については、製品に同封されております使用説明書をご覧ください。

ステーの表面に「手のひら側」「甲側」等の刻印があります。ステー挿入時にご確認ください。

手のひら側ステー、甲側ステーの挿入をお願いします。

〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲(手のひらの周径)	1箱入数	価格(本体価格)
303301	S	16cm~18cm	1コ	¥2,500
303302	M	18cm~20cm		
303303	L	20cm~22cm		



●サイズの選び方
手のひらの周径に合わせて選んでください。手のひらの周径は示指と小指の付け根付近の手のひらの周径を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

片手で簡単に装着できる母指用サポーター。

使用用途 母指CM関節のサポート・安静保持



特長 1 母指CM関節のサポート・安静保持



母指の固定、可動域の制限により患部を安静に保持し、痛みを軽減します。



芯材には樹脂ステーを使用し、母指周りに内蔵。指先の動作を妨げない程良い固定力です。



母指ストラップがスライドして動くようになっているため、固定力の調節が可能です。

特長 2 片手で簡単装着



手を通してストラップをとめるだけで片手で簡単に装着できます。



ストラップのループ部にプラスチックパーツを入れ、装着時に本体が回らずストラップを簡単に締めることができます。

特長 3

薄くかさばらない
生地が薄くかさばらず、コンパクトな形状です。

特長 4

洗濯可能
サポーター本体は汚れても丸ごと洗濯ができます。

〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲(手くび周径)	目安寸法(母指周径)	1箱入数	価格(本体価格)
303401	S	12.5cm~14.5cm	5.0cm~6.0cm	1コ	¥2,000
303402	M	14.5cm~16.5cm	5.5cm~6.5cm		
303403	L	16.5cm~19.0cm	6.0cm~7.5cm		

●サイズの選び方



手くび周径(手くびの一番細いところ)に合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

軽度膝OAなどの膝関節疾患に、 簡便に装着できるサポーター。

使用用途

膝関節のサポート

特長 1
着脱のしやすい、
フロントオープン形状です。

特長 2
サポーター前面に指を
引っ掛ける穴が
あるのでつかみやすく
着脱しやすい形状です。


特長 3
膝裏の素材に
軽量で通気性の良い
ダブルラッセルを
使用しています。

特長 4
アクティブ樹脂ステー
内蔵で、フィット性を
高めています。

〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲 (大腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
302401	S	34cm~38cm	1コ	¥2,000
302402	M	38cm~44cm		
302403	L	44cm~50cm		
302404	LL	50cm~56cm		

●サイズの選び方

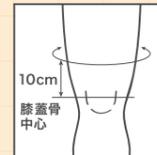

大腿周囲に合わせて選んでください。
大腿周囲は普通に立った状態で、
膝蓋骨中心から10cm上の周囲を計測
してください。計測値が2サイズの
さかになった場合は、大きい方の
サイズを選んでください。

膝関節の保温に。

使用用途

膝関節のサポート

特長 1
立体構造
脚の形状に合わせて編まれた
立体構造です。
サポーター全面で均一に脚を
押さえるため、血行を妨げません。


特長 2
アクティブ樹脂ステー
両サイドにアクティブ樹脂ステーを配置。
カーリングやねじれ・ズレを防ぎ
フィット性を高めます。

特長 3
起毛の裏地
裏地は起毛させており、
空気の層によるやさしい暖かさです。

〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲 (大腿周囲)	1箱入数	価格 (本体価格)
303101	S	40cm~43cm	1コ	¥3,900
303102	M	43cm~46cm		
303103	L	46cm~49cm		
303104	LL	49cm~52cm		
303105	3L	52cm~55cm		

●サイズの選び方

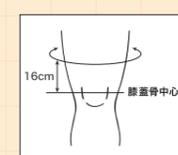

大腿周囲に合わせて選んでくださ
い。大腿周囲は普通に立った状態
で、膝蓋骨中心から16cm上の周
囲を計測してください。計測値が2
サイズのさかになった場合は、大
きい方のサイズを選んでください。

腱とかかとの安定感を高め、アキレス腱をサポート。

使用用途

アキレス腱の保護


日常生活や運動時における、かかとのぐらつきをしっかりサポート。



装着完了時(右足の場合)




■ 前から見た図 ■ 内側から見た図 ■ 後ろから見た図 ■ 外側から見た図

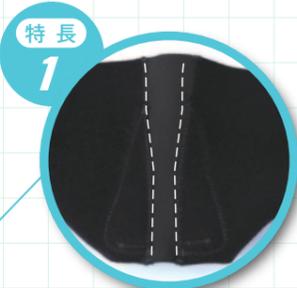

特長 1

本体およびアウトーストラップに立体的裁断を採用しており、高いフィット性を実現します。

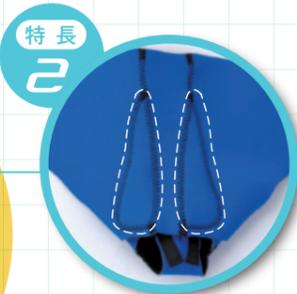

特長 2

アキレス腱パッドが、アキレス腱周辺を優しく包み込む様にサポートし、安定感を高めます。



特長 3

アウトーストラップのテーピング機能部分に非伸縮素材を採用しており、アキレス腱が伸ばされる足関節の背屈を抑制します。



特長 4

テーピング機能(ヒールロック)を利用したアウトーストラップが、かかとの安定感を高めます。アキレス腱付着部の踵骨を安定させることで、アキレス腱へのストレスを軽減します。

※製品の装着状態を分かりやすくお伝えするために、素足に製品を着用した写真を使用しています。実際にご使用いただく際は、靴下の上から装着してください。

〈サイズ表〉左右兼用


品番	サイズ	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数	価格(本体価格)
302202	M	21cm~25cm	1コ	¥4,000
302203	L	25cm~29cm		

※靴サイズが2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズをお選びください。

テーピング理論(フィギュア8)を応用した巻くタイプのサポーター。足関節の圧迫・保護に。

使用用途

足関節のサポート

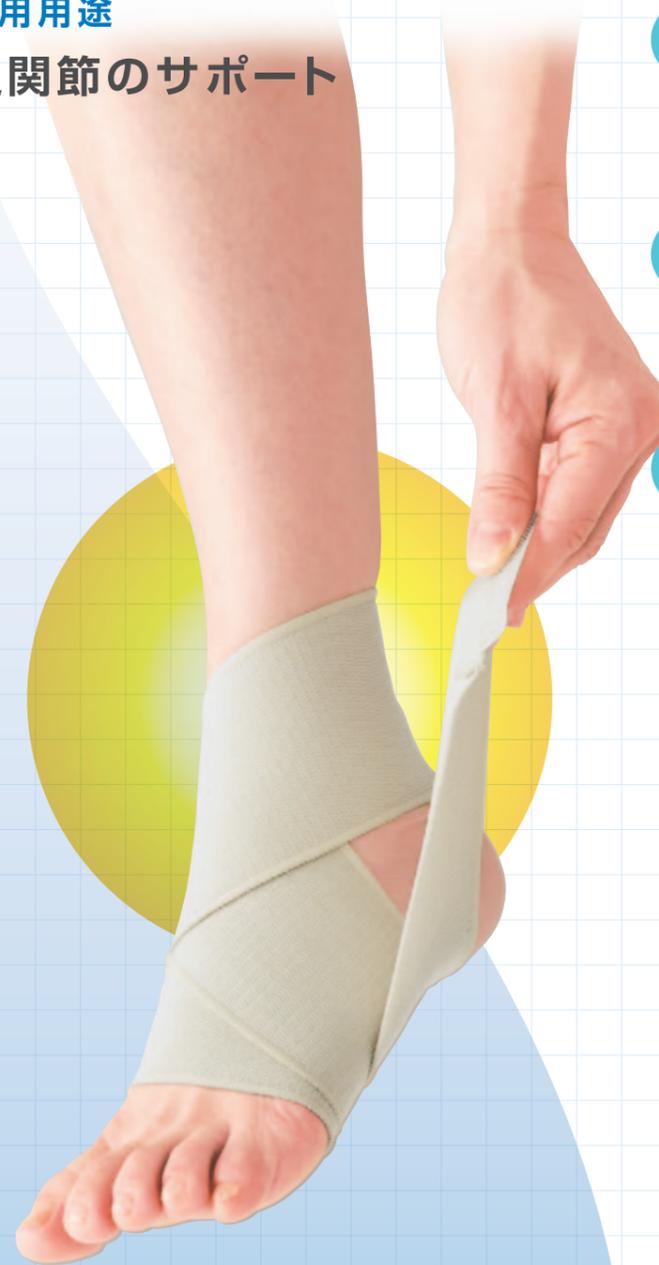


特長 1

快適な装着感
肌触りのよい伸縮素材を採用しています。また抗菌加工を施しており、洗濯もできるので、繰り返し清潔にご利用いただけます。



特長 2

足関節を適度に圧迫・保護
生地に伸縮性があり、面ファスナーはどこにでも接着できるので、様々な足関節の太さにも対応します。また、圧迫力やフィット感の調節が可能です。

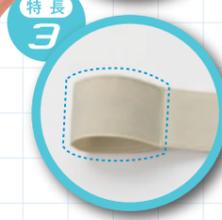

特長 3

装着が簡単
巻き始めがループ形状なので、簡単に巻くことができます。

装着手順

STEP.1

通す



STEP.2

巻く



STEP.3

とめる



〈サイズ表〉左右兼用

品番	サイズ	適用範囲(靴サイズ)	1袋入数	1箱入数	価格(本体価格)
302501	フリーサイズ	20.0cm~27.5cm	1コ	5袋	¥6,000 (1袋:¥1,200)

軽度の内反動揺性、前方動揺性に 対応した汎用性のある足関節サポーター。

使用用途 足関節のサポート

特長 1 樹脂製のステーとゴムストラップで足関節をサポート。



足の内側に樹脂製のステーを挿入し、足関節をサポートします。



伸縮性のあるゴムストラップがテーピングのフィギュアエイトに基づいたサポート機構で足関節をサポート。また、ゴムストラップを巻きつけることでステーのサポート力を補強します。

特長 2 ステーの取り外しにより固定力の調節ができる、左右兼用で使用できる等、幅広い用途で使用できるマルチサポート、マルチユースな設計です。



ステーは左右で入れ替えることができるため、左右兼用で使用できます。



サポーター全体で足関節を保護。症状に合わせて、ステーを取り外す等固定力の調節ができます。

特長 3 フィット性の向上



サポーターの前面に薄い伸縮性生地を使用。フィット性を高めています。

特長 4 かさばりにくい形状



薄手の生地を使用し、かさばりにくい形状です。

特長 5 リアエントリー（後ろ開き）方式



リアエントリー（後ろ開き）方式で容易に装着できます。

ステーの挿入について

本品はステーが1本付属していますが、納品時は製品に挿入されておりません。装着される足の左右に応じて、ステーの挿入をお願いいたします。



患者様に処方される際にステーの挿入をお願いいたします。ステーの挿入方法については、製品に同封されており、使用説明書をご覧ください。



ステーは装着する足の内側に挿入してください。



ステー挿入後、患者様に装着をお願いいたします。

〈サイズ表〉左右兼用 足の小さい方にも対応


品番	サイズ	適用範囲(靴サイズ)	1箱入数	価格(本体価格)
303201	S	18cm~21cm	1コ	¥3,000
303202	M	21cm~25cm		
303203	L	25cm~30cm		

●サイズの選び方

日常使用されている靴のサイズに合わせて選んでください。靴サイズが2サイズのさかになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

LINE UP

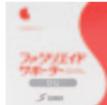

	品番	サイズ	適用範囲	1箱入数	価格(本体価格)
肩  	左右兼用		肩の付け根の太さ	1コ	¥2,980
	302301	S	34cm~41cm		
	302302	M	41cm~48cm		
	302303	L	48cm~55cm		
ひじ  	左右兼用		前腕周囲	5袋 (1コ/1袋)	¥5,000 (1袋:¥1,000)
	302601	フリーサイズ	19cm~31cm		
手くび  	左右兼用		手のひらの周径	1コ	¥2,500
	303301	S	16cm~18cm		
	303302	M	18cm~20cm		
	303303	L	20cm~22cm		
母指  	左右兼用		手くび周径 母指周径(目安寸法)	1コ	¥2,000
	303401	S	12.5cm~14.5cm 5.0cm~6.0cm		
	303402	M	14.5cm~16.5cm 5.5cm~6.5cm		
	303403	L	16.5cm~19.0cm 6.0cm~7.5cm		

	品番	サイズ	適用範囲	1箱入数	価格(本体価格)
膝ショート  	左右兼用		大腿周囲	1コ	¥2,000
	302401	S	34cm~38cm		
	302402	M	38cm~44cm		
	302403	L	44cm~50cm		
	302404	LL	50cm~56cm		
ひざ保温  	左右兼用		大腿周囲	1コ	¥3,900
	303101	S	40cm~43cm		
	303102	M	43cm~46cm		
	303103	L	46cm~49cm		
	303104	LL	49cm~52cm		
	303105	3L	52cm~55cm		
アキレス腱  	左右兼用		靴サイズ	1コ	¥4,000
	302202	M	21cm~25cm		
	302203	L	25cm~29cm		
足くび  	左右兼用		靴サイズ	5袋 (1コ/1袋)	¥6,000 (1袋:¥1,200)
	302501	フリーサイズ	20.0cm~27.5cm		
足くびマルチ  	左右兼用		靴サイズ	1コ	¥3,000
	303201	S	18cm~21cm		
	303202	M	21cm~25cm		
	303203	L	25cm~30cm		

ファシリエイド サポーター FACILIAID SUPPORTER



日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3200

- 北海道営業所：〒060-0806 札幌市北区北6条西1-4-2 TEL.011(738)5881
- 東北営業所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 TEL.022(298)0871
- 北関東営業所：〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-169-2 TEL.048(657)3950
- 東日本営業所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3210
- 南関東営業所：〒231-0023 横浜市中区山下町51-1 TEL.045(663)0261
- 中部営業所：〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15 TEL.052(219)0851
- 西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36 TEL.06(6398)0290
- 中国営業所：〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16 TEL.082(264)4701
- 四国営業所：〒790-0005 松山市花園町3-21 TEL.089(933)5515
- 九州営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-1 TEL.092(474)7821

※本製品に関するお問い合わせは、最寄りの各営業所までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。