

ベーシックサポーター

固定・保温サポーター



私たちは、医療現場 + 患者さんのサポーターです。

身体各部位の、幅広い症例に対応して、
豊富なアイテムを取りそろえた、シグマックスのサポーター製品群。


患部の的確な固定、保温に……
現場のニーズに応えた使い勝手の良さと、
患者さんの快適な着け心地を十分に配慮した設計です。

頸椎固定用シーネ



カラーキーパー
3-4p

鎖骨固定帯

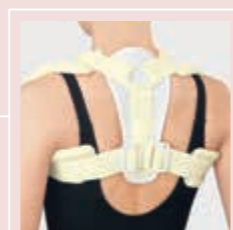

クラビクルブレース
2p

胸部固定帯



リブバンド
5-6p

腰部・大腿部用サポーター



プレパンツ
2p

膝関節固定帯



ニースプリント
伸展タイプ / 屈曲タイプ
7-8p

医療用サポーター



ウールサポーター
シームレスサポーター
9p

本カタログでご紹介しているベーシックシリーズの他に、「マックスベルト」シリーズをはじめとする各種固定帯を取り揃え、
日本シグマックスは、トータルなサポーターシステムを提供しています。

クラビクルブレース

CLAVICLE BRACE

[主な用途] 鎖骨骨折時の修復後の固定



圧迫感を和らげる、厚手のクッション材。

- ◎腋窩の圧迫を軽減した形状です。
- ◎ストラップクッションの角度を肩幅に合わせて微調整できます。
- ◎アジャスターと面ファスナーでしっかりとめるダブルストッパー構造です。
- ◎背当てにプラスチックステーを入れ、よれにくくしています。
- ◎3SからLLサイズまでの幅広いサイズ構成です。



品番	種類	参考適用範囲※		1箱入数
		男性(胸囲)	女性(アンダーバスト)	
15601	3S	40cm~50cm	40cm~50cm	1コ
15602	SS	50cm~60cm	50cm~60cm	1コ
15603	S	60cm~70cm	60cm~65cm	1コ
15604	M	70cm~85cm	65cm~80cm	1コ
15605	L	85cm~115cm	80cm~115cm	1コ
15606	LL	115cm~150cm	115cm~150cm	1コ


※男性は胸囲、女性はアンダーバストを計測してください。

腰部・大腿部用サポーター

プレパンツ

PREPANTS

[主な用途] 人工関節の術後、植皮術後などの腰部、大腿部の圧迫

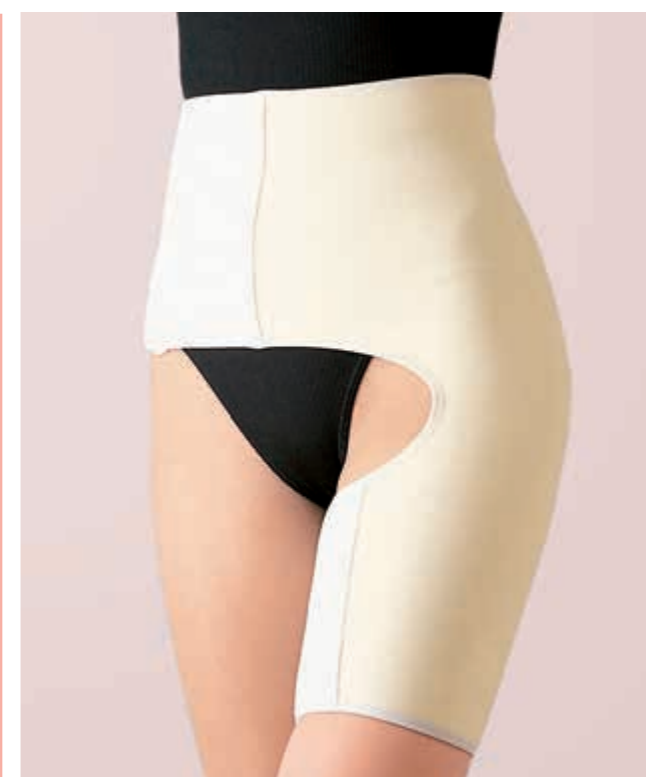

圧迫力の調節が可能。

- ◎腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置し、圧迫力の調節を可能にしました。
- ◎サポーター本体には、弾力性とフィット性のある生地を使用しています。
- ◎吸水性、透湿性に富み、肌触りのよい素材です。
- ◎左右兼用です。



◀ 2本の面ファスナーで、
容易に着脱。圧迫力の
調節もできます。

品番	種類	適用範囲		1箱入数
		(ヒップ周囲)	(大腿周囲)	
17001	S	60cm~75cm	40cm~45cm	1コ
17002	M	75cm~90cm	45cm~51cm	1コ
17003	L	90cm~110cm	51cm~58cm	1コ
17004	LL	110cm~130cm	58cm~65cm	1コ

※ヒップ周囲を基準とし大腿周囲は目安としてください。

使い心地よく、衛生的に——カラーキーパーシリーズ。

汗をかきやすい首回りだから、芯材に抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを採用しました。



カラーキーパー



カラーキーパー・U

本体を覆う素材は、肌触りの良い綿素材を使用しています。

カバーや*本体も洗濯できます。いつでも清潔に保てます。



カバーだけを取り外せるので、洗濯しやすくなっています。(カラーキーパーのみ)

2枚のシートで高さを調節。顎の形状に合わせた、自然なカーブは、フィット性が高くしっかりと固定します。



カラーキーパー・ハード



カラーキーパー・me

面ファスナーのとめ部分は、外れにくいダブルストッパー方式です。

安全性を重視しホルムアルデヒドの含有量をベビー用品の基準以下にしています。



カラーキーパーシリーズ


COLLAR KEEPER series

[主な用途] 頸部の固定

カラーキーパー

多くの症例に幅広く対応。

- ◎ 顎や首にあたる内側は柔らかいポリウレタンフォーム、外側は硬めのポリエチレンフォームと2種類の素材を貼り合わせ、ソフトな装着感と適度な固定力を両立しています。
- ◎ 芯材に形状安定樹脂を内蔵し、予め丸みをつけて楽に装着できます。

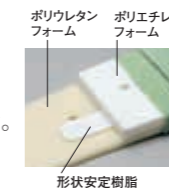

品番	種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱入数
311000	SS	25cm~30cm	7.5cm	1コ
311001	S	30cm~35cm	8.0cm	1コ
311002	M	35cm~40cm	8.5cm	1コ
311003	L	40cm~45cm	8.0cm	1コ



カラーキーパー・U

軽症時のソフトタイプ。

- ◎ 本体の形状は、首回りの形状に沿うようカットしてあります。芯材は、柔らかくても弾力性のあるポリウレタンフォームを採用しています。
- ◎ また、多くの通気孔を設けムレにくくしています。



品番	種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱入数
311101	S	30cm~35cm	8.0cm	1コ
311102	M	35cm~40cm	8.5cm	1コ
311103	L	40cm~45cm	8.0cm	1コ



カラーキーパー・ハード

固定力の強いハードタイプ。

- ◎ 汗をかきやすい首回りを快適に保つよう芯材に通気孔を設け、ムレにくくしています。
- ◎ 2枚のシートを上下にずらして、高さを調節できます。
- ◎ フィット性を高めるため、シートの形状は、上側は顎の形状に合わせ、下側は鎖骨に合わせて自然なカーブをつけてあります。



品番	種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱入数
311201	S	30cm~35cm	8.0cm~ 9.5cm	1コ
311202	M	35cm~40cm	8.5cm~10.0cm	1コ
311203	L	40cm~45cm	8.0cm~ 9.5cm	1コ



カラーキーパー・me (メッシュタイプ)

通気性の良いメッシュタイプ。

- ◎ メッシュ素材を採用し、通気性に優れています。
- ◎ 2枚のシートを上下にずらして、高さを調節できます。
- ◎ フィット性を高めるため、シートの形状は、上側は顎の形状に合わせ、下側は鎖骨に合わせて自然なカーブをつけてあります。



品番	種類	適用範囲 (首回り)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱入数
311301	S	30cm~35cm	8.0cm~ 9.5cm	1コ
311302	M	35cm~40cm	8.5cm~10.0cm	1コ
311303	L	40cm~45cm	8.0cm~ 9.5cm	1コ



装着への工夫、衛生への配慮——リブバンドシリーズ。

通気性の良い本体生地。肌面は、肌触りの良いパイル地を使用。

前合わせ部両端に、持ちやすいポケット状の装着機構があり、ラクに引き寄せることができます。

ポリウレタンフォーム
綿パイル地

素肌に装着するものだから、抗菌防臭・消臭加工やメッシュ素材を使用し、通気性と装着感に配慮しました。

腋窩部にあたりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定します。

リブバンド正面

リブバンド

リブバンド(女性用)

リブバンドⅡ

リブバンド me

リブバンド背面

背部は、通気性の良い伸縮生地を採用。下方を狭くしてフィット性を向上しています。

リブバンドシリーズ

RIB BAND series
【主な用途】 胸部の圧迫・固定

リブバンド

豊富なサイズ構成のスタンダードタイプ。



- ◎幅広いサイズ構成で、さまざまな体型にフィットします。また、一般用と女性用のタイプがあります。
- ◎本体生地には、抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用しています。

▽女性用は乳房を圧迫しない形状です。



品番	種類	適用範囲※	1箱入数
313000	SS	55cm~70cm	1コ
313001	S	70cm~85cm	1コ
313002	一般用	M	85cm~100cm
313003		L	100cm~120cm
313004		LL	120cm~140cm
313005		3L	140cm~160cm
313102	女性用	M	60cm~75cm
313103		L	75cm~90cm
313104		LL	90cm~105cm

※一般用は胸囲、女性用はアンダーバストを計測してください。

リブバンドⅡ

フロント2分割構造で、圧迫力の調節が可能。



- ◎上下に2分割された前合わせで、体型や症状に合わせた圧迫力の微調節ができます。
- ◎本体生地には、抗菌防臭・消臭加工を施したポリウレタンフォームを使用しています。



品番	種類	適用範囲(胸囲)	1箱入数
313201	S	70cm~85cm	1コ
313202	M	85cm~100cm	1コ
313203	L	100cm~120cm	1コ
313204	LL	120cm~140cm	1コ

リブバンド me (メッシュタイプ)

通気性・吸汗性に優れたメッシュタイプ。



- ◎通気性・吸汗性を持ったメッシュ素材を採用。従来にありがちなゴワつき感がなく、肌面はパイル地なので快適な肌触りです。
- ◎背部にも、通気性に優れた伸縮性メッシュ素材を使用しています。




品番	種類	適用範囲(胸囲)	1箱入数
313301	S	70cm~85cm	1コ
313302	M	85cm~100cm	1コ
313303	L	100cm~120cm	1コ
313304	LL	120cm~140cm	1コ

的確な固定、快適な装着性を追求——ニースプリント。



よりよく固定するために、
使う人の身になって、
装着しやすさと
快適感を追求しました。

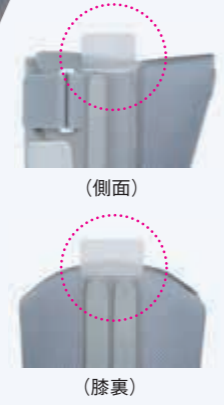

ステーカーの出し入れ口に、
面ファスナーの蓋を付け、
ステアの飛び出しを防止。
肌を擦ったり、傷つけないよう工夫しました。


ステアを両サイドに1本ずつ、
膝裏には2本配置。
必要に応じて、ステアを
変形・取り外しできます。

ニースプリント

〈伸展タイプ〉
〈屈曲タイプ〉
KNEE SPLINT
【主な用途】 膝部疾患時の固定、膝関節手術後・リハビリテーション時の固定



微調整できるステアへの工夫。

- ◎側面ステアを納める筒状のポケット(側面ステアカバー)を、本体両サイドに2つ並列させています。1本のステアをどちらに挿入するかで、ステアの位置を前後に微調整できます。
- ◎膝裏のステアは、強度の高いアルミステアを使用。患者さんの足の形状に合わせて加工ができます。

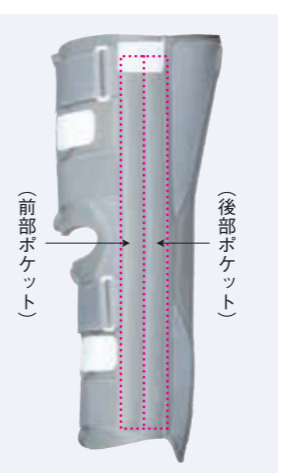


膝裏部のフィット性を向上。

- ◎本体後面の膝裏部分にクッション材を追加しました。膝裏のフィット性が向上し、膝裏ステアによる局所的な圧迫をやわらげます。

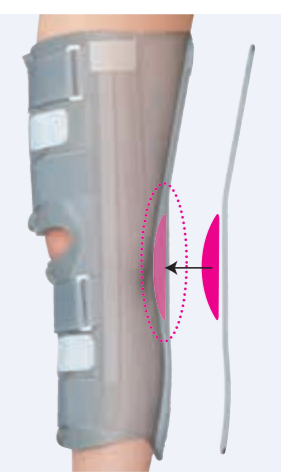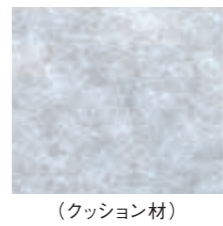


装着時に便利、仮どめ面ファスナー。

- ◎ストラップを着ける前に、ちょっと仮どめておくことで、装着がラクになります。

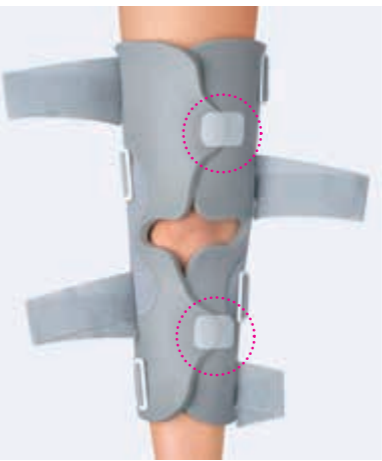


本体後面には通気性の高い生地を採用。

- ◎本体後面およびパッド部分は、通気性の高い素材を使用しました。ムレにくく、肌触りもよく快適な装着感です。

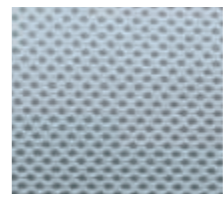

幅広いサイズ構成で、さまざまな使用状況と体型に対応します。

- ◎さまざまな使用状況や体型に対応するために、豊富なサイズバリエーションを揃えました。
- ◎特に大腿周囲41~53cmの場合では、丈の長さが異なる「ショートM・L」(伸展タイプのみ)、「M・L」と「ロングM・L」を用意しています。

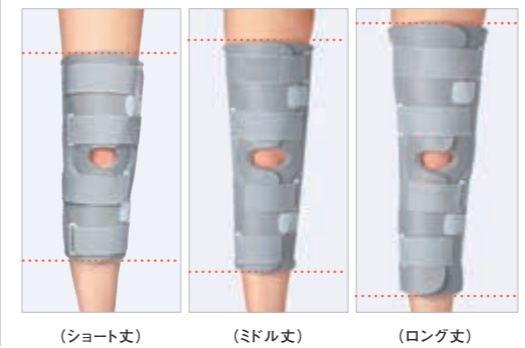

ニースプリント〈伸展タイプ〉

品番	種類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1箱入数
301001	S	48.5cm	33cm~41cm	26cm以上	10
301002	M・L	48.5cm	41cm~53cm	26cm以上	10
301012	ロングM・L	52.0cm	41cm~53cm	29cm以上	10
301014	ロングLL	52.0cm	53cm~65cm	29cm以上	10
301021	ショートS	41.5cm	33cm~41cm	19cm以上	10
301022	ショートM・L	41.5cm	41cm~53cm	19cm以上	10

ニースプリント〈屈曲タイプ〉

品番	種類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1箱入数
301101	S	48.5cm	33cm~41cm	26cm以上	10
301102	M・L	48.5cm	41cm~53cm	26cm以上	10
301112	ロングM・L	52.0cm	41cm~53cm	29cm以上	10
301114	ロングLL	52.0cm	53cm~65cm	29cm以上	10

※大腿周囲を基準にお選びください。
大腿周囲は膝蓋骨の中心から10cm上を計測してください。
計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズをお選びください。
※製品丈は股下の大腿長を参考に使用状況に合わせてお選びください。
股下の大腿長は、膝蓋骨中心から股の高さまでの長さを計測してください。

ウール サポーター

WOOL SUPPORTER

[主な用途] 関節の保温・圧迫



ウールならではの優れた保温性。

- ◎ 関節の保温・圧迫用サポーターです。
- ◎ 縦横両方向に伸び、患部にやさしくフィットします。
- ◎ ウールを混紡しています。

ラテックスゴム
使用

品番	種類	適用範囲※	1袋 入数	1箱 入数
301301	ひじS	20cm~25cm	1枚	6袋
301302	ひじM・ひざS	23cm~30cm	1枚	6袋
301303	ひじL・ひざM	30cm~40cm	1枚	6袋
301304	ひざL	40cm~50cm	1枚	6袋
301305	ひざM(ロング)	30cm~40cm	1枚	6袋
301306	手のひら	—	1枚	6袋
301307	手くび	17cm~23cm	2枚	6袋
301308	足くび	(靴サイズ) 23cm~27cm	1枚	6袋
301309	肩M	(胸囲) 65cm~75cm	1枚	3袋
301310	肩L	(胸囲) 75cm~95cm	1枚	3袋

※ひじは肘頭から10cm上の周径、ひざは膝蓋骨中心から12cm上の周径を目安にしてください。
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

シームレス サポーター

SEAMLESS SUPPORTER

[主な用途] 関節の保温・圧迫



肌触りに優れたエコノミータイプ

- ◎ 関節の保温・圧迫用サポーターです。
- ◎ 吸湿性と肌触りの良い素材を使用しています。
- ◎ 様々な用途に幅広く対応する医療用サポーターです。

ラテックスゴム
使用

品番	種類	適用範囲※	1袋 入数	1箱 入数
301401	手くび	15cm~20cm	2枚	6袋
301402	手のひら	—	1枚	6袋
301403	ひじ	20cm~25cm	1枚	6袋
301404	ひざ	35cm~45cm	1枚	6袋
301405	足くび	(靴サイズ) 23cm~27cm	1枚	6袋
301406	すね	25cm~35cm	1枚	6袋
301407	もも	45cm~55cm	1枚	6袋

※ひじは肘頭から10cm上の周径、ひざは膝蓋骨中心から12cm上の周径を目安にしてください。
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

日本シグマックス株式会社


本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1 TEL.03(5326)3200

■北海道営業所：〒060-0806 札幌市北区北6条西1-4-2	TEL.011(738)5881
■東北営業所：〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3	TEL.022(298)0871
■北関東営業所：〒330-0846 さいたま市大宮区大門町3-169-2	TEL.048(657)3950
■東日本営業所：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1	TEL.03(5326)3210
■南関東営業所：〒231-0023 横浜市中区山下町51-1	TEL.045(663)0261
■中部営業所：〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-15	TEL.052(219)0851
■西日本営業所：〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-36	TEL.06(6398)0290
■中国営業所：〒732-0824 広島市南区的場町1-2-16	TEL.082(264)4701
■四国営業所：〒790-0005 松山市花園町3-21	TEL.089(933)5515
■九州営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-1	TEL.092(474)7821

※本製品に関するお問い合わせは、最寄りの各営業所までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>

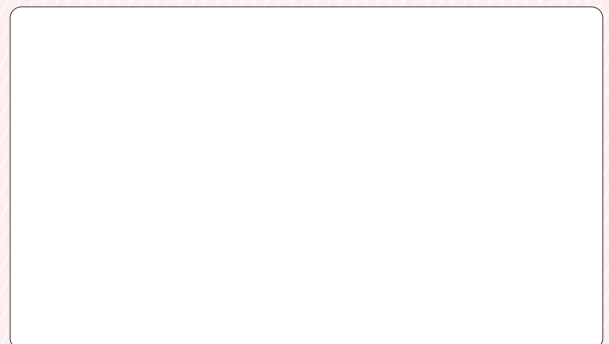

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。