

ナーシングケアプロダクツ

看護用品



 SIGMAX



粘着性伸縮包帯

BENEFACT®		3
ベネファクト®		
【粘着性伸縮包帯】		
BENELUKE®		3
ベネルーク®		
【粘着性ガーゼ包帯】		
BENESTORK®		3
ベネストーク®		
【粘着性弾力包帯】		



伸縮包帯

L-WEAVE®		4
エルウェーブ®		
【弾力包帯】		
ELTECT®		4
エルテクト®		
【弾性包帯】		
L-WHITE		4
エルホワイト®		
【伸縮包帯】		
L-WHITE-S		4
エルホワイト®-S		
【伸縮包帯】		



ネット・チューブ包帯

RETELATAY®		5
レテラタイ®		
【伸縮ネット包帯】		
ELUTUBE®		5
エルチューブ®		
【弾力チューブ包帯】		



チューブ包帯

ROLL-UPSTOCKINET		6
ロールアップストックキネット		
【チューブ包帯】		

INDEX

医療用 弾性ストッキング

AT STOCKING

AT ストッキング

【医療用 弾性ストッキング】



7

CV STOCKING

CV ストッキング

【医療用 弾性ストッキング】



8

ドレッシング材

CUTAS[®]

キュータス[®]

【救急絆創膏】



9

CUTAS[®]・α

キュータス[®]・^α

【救急絆創膏】



9

多目的防水パッド

UNDER PAD C

アンダーパッド C

【多目的防水パッド】




10

粘着性伸縮包帯

BENEFACT®

ベネファクト®

【粘着性伸縮包帯】

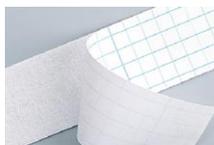

▲ 剥離紙の1cm角の方眼が、カットの目安になります。



適度な伸縮性。屈曲部にもフィット。

- ◎適度な伸縮性と粘着力で、動きのある関節部などにフィットします。
- ◎皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- ◎白とベージュの2色があります。

主な用途

- 捻挫、脱臼時の固定
- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定
- 術後の圧迫固定

品番		種類	製品規格(幅×実長)	1箱入数
ホワイト	ベージュ			
4101	4111	1号	1.25cm×5m	24巻
4102	4112	2号	2.50cm×5m	12巻
4103	4113	3号	5.00cm×5m	6巻
4104	4114	4号	7.50cm×5m	4巻
4105	4115	5号	10.00cm×5m	3巻
4106	4116	6号	3.75cm×5m	8巻

BENELUKE®

ベネルーク®

【粘着性ガーゼ包帯】



▲ 剥離紙の1cm角の方眼が、カットの目安になります。



やわらかい不織布製の基布を使用。

- ◎皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- ◎通気性を保つため、粘着剤はストライプ状に塗工してあります。

主な用途


- ガーゼ、脱脂綿、湿布薬などの固定
- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定

品番	種類	製品規格(幅×実長)	1箱入数
17902	2号	2.5cm×10m	12巻
17904	4号	5.0cm×10m	6巻
17905	5号	7.5cm×10m	4巻
17906	6号	10.0cm×10m	3巻
17907	7号	15.0cm×10m	2巻

BENESTORK®

ベネストーク®

【粘着性弾力包帯】

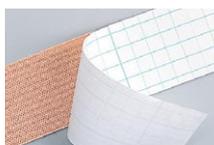

▲ 剥離紙の1cm角の方眼が、カットの目安になります。



適度な圧迫固定が必要な時に。

- ◎強撚糸を使用した厚手の基布を使用しています。弾力性に富み、圧迫固定に適しています。
- ◎皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用しています。
- ◎粘着剤は、ストライプ状に塗工してあります。

主な用途

- カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定
- 術後、止血、穿刺、肋骨骨折時の圧迫固定
- 関節可動域の抑制および固定
- 運動時のテーピング

品番	種類	製品規格(幅×伸長)	1箱入数
4302	2号	2.50cm×5m	12巻
4303	3号	3.75cm×5m	8巻
4304	4号	5.00cm×5m	6巻
4305	5号	7.50cm×5m	4巻
4306	6号	10.00cm×5m	3巻

伸縮包帯

L-WEAVE®

エルウェーブ®

【弾力包帯】

←伸長率=約200%→



オール Cotton の弾力包帯。

- ◎伸長率は約200%です。
- ◎厚手の生地ですのでしっかりした固定や圧迫が必要な時、副木の固定時などに適しています。
- ◎100% Cotton 素材。柔らかく、吸湿性にも優れています。
- ◎オートクレーブ滅菌が可能です。◎蛍光染料は一切使用していません。

主な用途 ●副木の固定 ●術後の圧迫固定

品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1箱入数
022	2号	5.0cm×4.5m	6巻
023	3号	7.5cm×4.5m	6巻
024	4号	10.0cm×4.5m	6巻
027	7号	17.5cm×4.5m	6巻

ELTECT®

エルテクト®

【弾性包帯】

←伸長率=約250%→



適度な弾力性と圧迫力。

- ◎伸長率は約250%です。
- ◎適度なフィット性と圧迫力・固定力で様々な部位に使用可能です。
- ◎やけどや術後の圧迫固定に適しています。
- ◎伸縮性に優れた糸を使用し、弾力性を高めています。

主な用途 ●やけど・術後などの圧迫固定

品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1箱入数
052	2号	5.0cm×9m	10巻
053	3号	7.5cm×9m	10巻
054	4号	10.0cm×9m	10巻
056	6号	15.0cm×9m	4巻

L-WHITE

エルホワイト®

【伸縮包帯】

←伸長率=約300%→



優れた伸縮性で、関節部にもフィット。

- ◎伸長率は約300%です。
- ◎日常の創傷保護などに適しています。
- ◎伸縮性に優れた糸を採用し、動きのある関節部にもフィットします。
- ◎編物製の包帯ですので、ほつれにくく耐久性に優れています。

主な用途 ●ガーゼ・湿布薬などの固定 ●創傷面の保護

品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1箱入数
012	2号	5.0cm×9m	10巻
013	3号	7.5cm×9m	10巻
014	4号	9.0cm×9m	10巻

L-WHITE-S

エルホワイト®-S

【伸縮包帯】

←伸長率=約300%→



巻きずれしにくい織り加工。

- ◎伸長率は約300%です。
- ◎日常の創傷保護などに適しています。
- ◎伸縮性に優れた糸を使用し、動きのある関節部にもフィットします。
- ◎表面に凹凸のある織り加工ですので、巻きずれが起りにくくなっています。
- ◎肌触りがよく、吸湿性、通気性に優れています。

主な用途 ●ガーゼ・湿布薬などの固定 ●創傷面の保護

品番	種類	製品規格 (幅×伸長)	1箱入数
032	2号	5.0cm×9m	10巻
033	3号	7.5cm×9m	10巻
034	4号	9.0cm×9m	10巻

ネット・チューブ包帯

RETELATAY®

レテラタイ®

【伸縮ネット包帯】



あらゆる部位に、スピーディな処置が可能。

- ◎伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯です。
- ◎部位の形状に合わせて、自由にカットできます。
- ◎タテ・ヨコとも切り口がはつれない、編み方を採用しています。
- ◎指から体幹までをカバーする豊富なサイズ構成です。1号は指の処置に便利なアプリケーター付きです。



◀患部に触れずに包帯処置ができます。

主な用途 ● ガーゼ、湿布薬などの固定

品番	種類	適用範囲	製品規格(幅×伸長)	1箱入数
00061	1号	指	1.3cm×25m	1巻
00062	2号	手・足	2.5cm×25m	1巻
00063	3号	腕・下腿・足	2.8cm×25m	1巻
00064	4号	肩・大腿・膝	3.7cm×25m	1巻
00065	5号	頭・肩・大腿	6.1cm×25m	1巻
00066	6号	頭・胸・腰	7.8cm×25m	1巻
00067	7号	胸・腰	8.8cm×25m	1巻

ELUTUBE®

エルチューブ®

【弾力チューブ包帯】



適度な圧迫が必要な時に。

- ◎重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
- ◎洗濯が可能ですので、くり返し使用できます。

主な用途 ● 神経痛、リウマチなどの保温
● 軽度の圧迫
● 湿布薬の固定など

品番	種類	適用範囲	製品規格(幅×実長)	1箱入数
703	C	腕(小)・手首・足首	6.75cm×5m	1巻
704	D	腕(中)・脚(小)	7.50cm×5m	1巻
705	E	腕(大)・脚(中)	8.75cm×5m	1巻
706	F	脚(大)・大腿部	10.00cm×5m	1巻
707	G	大腿部(大)	12.00cm×5m	1巻
708	H	胴(小児)	14.00cm×5m	1巻

チューブ包帯

ROLL-UPSTOCKINET

ロールアップストックネット

【チューブ包帯】



現場でサッと装着できるチューブ包帯。

- ◎あらかじめドーナツ状に巻き上げてあります。そのまま手足の先端にあてがい、ロール部分をころがし伸ばすだけで、素早く、確実に装着できます。
- ◎高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高く、肌触りがソフトです。
- ◎四肢全体を的確に保護する、6種のサイズ構成。長さごとに端糸を色分けしてあるので、一目でわかります。
- ◎滅菌（オートクレーブ、EOG）することが可能です。

長さごとに端糸を色分け ▶

- 150cm
- 120cm
- 90cm



主な用途 ● 手術時における患者の四肢保温など

品番	種類	適応範囲	製品規格	1箱入数	端糸の色
110030	3号	上肢	7.6cm× 90cm	20個	白
110041	4号A		10.2cm× 90cm	20個	白
110042	4号B	下肢	10.2cm×120cm	20個	緑
110043	4号C		10.2cm×150cm	20個	青
110052	5号B		13.7cm×120cm	20個	緑
110053	5号C		13.7cm×150cm	20個	青

医療用 弾性ストッキング

AT STOCKING

AT ストッキング

【医療用 弾性ストッキング】



下肢を適度に圧迫する医療用 弾性ストッキングです。

- 足首部分は、24.7hPa (18.5mmHg)の圧迫圧があり、上方に向けて段階的に弱める設計です。
- 膝下、股下、アジャスタブルの3タイプを用意しました。アジャスタブルは大腿部の前面を着脱でき、術後の術創観察が必要な方や、大腿の太さに調節が必要な方に対応しています。
- 足底部と上部に、サイズ・長さが一目でわかるよう色分けをしています。
- 足底部の観察穴から、血行の状態を確認できます。
- 正しい位置に装着できるよう目印をつけています。(踵:ブルーゾーン/膝下:ライン)


主な用途 ● 段階的圧迫による下肢静脈還流の促進

膝下



【サイズの選び方】

下図の3箇所を計測し、「①足首周囲」、「②ふくらはぎ周囲」を基準にして製品を選んでください。

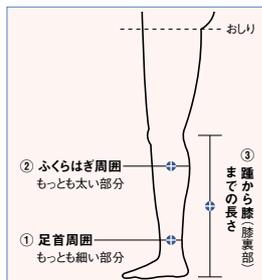

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
(差が1サイズ以内の場合)「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。(差が2サイズ以上の場合)適用できません。
- 「①足首周囲」が30.5cm以上、「②ふくらはぎ周囲」が52.0cm以上、「③膝下長」が45.5cm以上の場合には適用できません。


品番	長さ・サイズ	適用範囲		
		①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③膝下長
1組入り	10組入り			
24111	24611 ショートS	17.5cm~20.0cm	25.0cm~32.0cm	30.5cm~36.0cm
24112	24612 ショートM	20.0cm~22.5cm	32.0cm~37.0cm	33.0cm~38.0cm
24113	24613 ショートL	22.5cm~25.0cm	37.0cm~42.0cm	35.5cm~41.0cm
24114	24614 ショートLL	25.0cm~27.5cm	42.0cm~47.0cm	35.5cm~41.0cm
24115	24615 ショート3L	27.5cm~30.5cm	47.0cm~52.0cm	35.5cm~41.0cm
24120	24620 レギュラーSS	15.0cm~17.5cm	23.0cm~30.0cm	31.0cm~36.5cm
24121	24621 レギュラーS	17.5cm~20.0cm	25.0cm~32.0cm	36.0cm~40.5cm
24122	24622 レギュラーM	20.0cm~22.5cm	32.0cm~37.0cm	38.0cm~43.0cm
24123	24623 レギュラーL	22.5cm~25.0cm	37.0cm~42.0cm	41.0cm~45.5cm
24124	24624 レギュラーLL	25.0cm~27.5cm	42.0cm~47.0cm	41.0cm~45.5cm
24125	24625 レギュラー3L	27.5cm~30.5cm	47.0cm~52.0cm	41.0cm~45.5cm

股下



【サイズの選び方】

下図の4箇所を計測し、「①足首周囲」、「②ふくらはぎ周囲」、「③大腿周囲」を基準にして製品を選んでください。

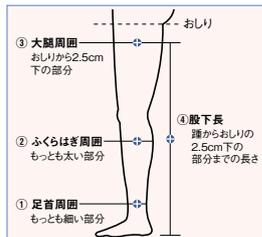

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
(差が1サイズ以内の場合)「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。(差が2サイズ以上の場合)適用できません。
- 「①足首周囲」が27.5cm以上、「②ふくらはぎ周囲」が47.0cm以上、「③大腿周囲」が78.5cm以上、「④股下長」が78.5cm以上の場合には適用できません。
- ★寸法が適用外になってしまった場合は「膝下」をご参照ください。


品番	長さ・サイズ	適用範囲			
		①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③大腿周囲	④股下長
24201	XショートS	17.5cm~20.0cm	25.0cm~32.0cm	40.5cm~55.5cm	58.5cm~66.0cm
24202	XショートM	20.0cm~22.5cm	32.0cm~37.0cm	48.5cm~63.5cm	
24203	XショートL	22.5cm~25.0cm	37.0cm~42.0cm	58.5cm~73.5cm	66.0cm~73.5cm
24210	ショートSS	15.0cm~17.5cm	23.0cm~30.0cm	33.0cm~48.0cm	
24211	ショートS	17.5cm~20.0cm	25.0cm~32.0cm	40.5cm~55.5cm	73.5cm~78.5cm
24212	ショートM	20.0cm~22.5cm	32.0cm~37.0cm	48.5cm~63.5cm	
24213	ショートL	22.5cm~25.0cm	37.0cm~42.0cm	58.5cm~73.5cm	73.5cm~78.5cm
24214	ショートLL	25.0cm~27.5cm	42.0cm~47.0cm	63.5cm~78.5cm	
24220	レギュラーSS	15.0cm~17.5cm	23.0cm~30.0cm	33.0cm~48.0cm	73.5cm~78.5cm
24221	レギュラーS	17.5cm~20.0cm	25.0cm~32.0cm	40.5cm~55.5cm	
24222	レギュラーM	20.0cm~22.5cm	32.0cm~37.0cm	48.5cm~63.5cm	73.5cm~78.5cm
24223	レギュラーL	22.5cm~25.0cm	37.0cm~42.0cm	58.5cm~73.5cm	
24224	レギュラーLL	25.0cm~27.5cm	42.0cm~47.0cm	63.5cm~78.5cm	

アジャスタブル



【サイズの選び方】

下図の4箇所を計測し、「①足首周囲」、「②ふくらはぎ周囲」、「③大腿周囲」を基準にして製品を選んでください。

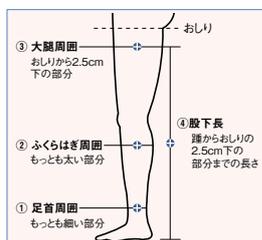

品番	長さ・サイズ	適用範囲			
		①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③大腿周囲	④股下長
24521	S	17.5cm~19.5cm	28.0cm~32.5cm	44.5cm~63.5cm	71.0cm~76.5cm
24522	M	19.5cm~21.5cm	32.5cm~35.5cm	53.5cm~71.0cm	
24523	L	21.5cm~23.5cm	35.5cm~39.5cm	61.0cm~80.0cm	
24524	LL	23.5cm~25.5cm	39.5cm~42.5cm	70.0cm~84.0cm	

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
(差が1サイズ以内の場合)「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。
(差が2サイズ以上の場合)適用できません。
- 「①足首周囲」が25.5cm以上、「②ふくらはぎ周囲」が42.5cm以上、「③大腿周囲」が84.0cm以上、「④股下長」が76.5cm以上の場合には適用できません。
- ★寸法が適用外になってしまった場合は「膝下」をご参照ください。

医療用 弾性ストッキング

CV STOCKING

CV ストッキング

[医療用 弾性ストッキング]




※写真はライトです。

下肢の静脈還流を日常的にサポートします。

- ◎「足首」「ふくらはぎ」「大腿」各部位に適度な圧迫圧がかかるよう、それぞれ繊維や編み方を使い分けています。
- ◎マルチレイヤー（重ね履き）方式で、圧迫圧が高いタイプでもスムーズに装着できます。
- ◎日本人の体型にあった製品形状です。
- ◎生地や色、丈などあらゆるシーンに対応できるようバリエーションを揃えました。
- ◎踵部分のフィット性を高めるための編み方を採用、また股下タイプには大腿部にシリコンドットを装備するなど快適な機能を追求しています。

主な用途

● 段階的圧迫による下肢静脈還流の促進、
静脈血・リンパ液のうっ滞軽減・予防

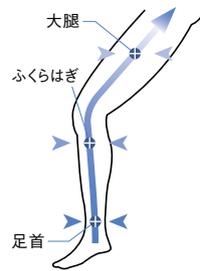


静脈還流の改善に、理想的な段階的圧迫設計

圧迫レベル	足首	ふくらはぎ	大腿
ライト	21.3hPa 16.0mmHg	14.7hPa 11.0mmHg	10.0hPa 7.5mmHg
ノーマル	28.7hPa 21.5mmHg	19.3hPa 14.5mmHg	13.3hPa 10.0mmHg
ストロング	40.0hPa 30.0mmHg	26.0hPa 19.5mmHg	—

【サイズの選び方】

下図の3箇所を計測し、「①足首周囲」、「②ふくらはぎ周囲」を基準にしてサイズを選んでください。（膝下および膝下ソックスの場合、下図の①②の2箇所を計測）。

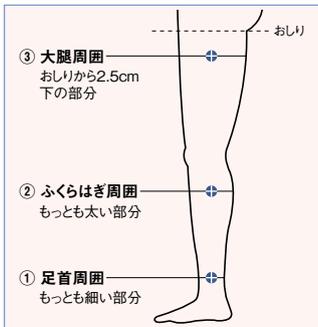

サイズ選択時の留意点

- 「①足首周囲」で選ぶサイズと、「②ふくらはぎ周囲」のサイズが一致しない場合。
（差が1サイズ以内の場合）
「①足首周囲」で選んだサイズを選択してください。
（差が2サイズ以上の場合）
適用できません。
- 膝下及び膝下ソックスの場合、「①足首周囲」が25.0cm以上、「②ふくらはぎ周囲」が43.0cm以上の場合には適用できません。
- 股下の場合、「①足首周囲」が25.0cm以上、「②ふくらはぎ周囲」が43.0cm以上、「③大腿周囲」が74.0cm以上の場合には適用できません。

圧迫レベル 圧迫圧(足首)	タイプ	品番	カラー	サイズ	適用範囲		
					①足首周囲	②ふくらはぎ周囲	③大腿周囲
ライト 21.3hPa 16.0mmHg	股下	521201	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	40.0cm~56.0cm
		521202		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	48.0cm~64.0cm
		521203		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	58.0cm~74.0cm
		521211	ベージュ	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	40.0cm~56.0cm
		521212		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	48.0cm~64.0cm
		521213		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	58.0cm~74.0cm
	膝下	521101	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		521102		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		521103		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—
		521111	ベージュ	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		521112		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		521113		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—
膝下ソックス	521001	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—	
	521002		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—	
	521003		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—	
ノーマル 28.7hPa 21.5mmHg	股下	522201	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	40.0cm~56.0cm
		522202		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	48.0cm~64.0cm
		522203		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	58.0cm~74.0cm
		522211	ベージュ	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	40.0cm~56.0cm
		522212		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	48.0cm~64.0cm
		522213		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	58.0cm~74.0cm
	膝下	522101	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		522102		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		522103		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—
		522111	ベージュ	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		522112		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		522113		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—
膝下ソックス	522001	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—	
	522002		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—	
	522003		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—	
ストロング [重ね履きタイプ] 40.0hPa 30.0mmHg	膝下	523101	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		523102		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		523103		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—
		523111	ベージュ	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		523112		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		523113		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—
	膝下ソックス	523001	黒	S	17.5cm~20.0cm	25.5cm~33.0cm	—
		523002		M	20.0cm~22.5cm	30.5cm~38.0cm	—
		523003		L	22.5cm~25.0cm	35.5cm~43.0cm	—

ドレッシング材

CUTAS®

キュータス® / キュータス®^{アルファ}・α

【救急絆創膏】



粘着部にも通気性を持たせた、
肌に優しい創傷保護用ドレッシング材です。

- ◎ 基布は、通気性に優れたポリエステル不織布を採用しています。
- ◎ 通気性粘着剤を使用しているため、基布の通気性を損ないません。また、皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤です。
- ◎ パッドの素材に、超吸収繊維を使用。血液や滲出液を素早く吸収し、保持します。
- ◎ パッド表面に、非固着性フィルムをラミネート。剥離の際、創面に貼りつかず、新生組織を傷つけません。



超吸収繊維

主な用途 ● 創傷の保護

キュータス®

幅広く使える、
スタンダードタイプ。




品番	種類	製品寸法		1箱入数
		パッド	粘着部	
4501	1号	2.5cm×3cm	5.0cm×5.0cm	100枚
4502	2号	3.0cm×4cm	5.0cm×7.2cm	50枚
4503	3号	3.0cm×6cm	6.0cm×10.0cm	50枚
4504	4号	5.0cm×7cm	10.0cm×12.5cm	20枚
4505	5号	5.0cm×10cm	10.0cm×16.0cm	20枚
4506	6号	5.0cm×15cm	10.0cm×20.0cm	20枚
4507	7号	5.0cm×20cm	10.0cm×25.0cm	20枚
4508	8号	5.0cm×25cm	10.0cm×30.0cm	20枚

届出番号 13B2X00187000023

キュータス®^{アルファ}・α

水まわりでも安心の撥水タイプ。

- ◎ キュータスに、ポリウレタンフィルムをプラス。基布に撥水加工をしています。

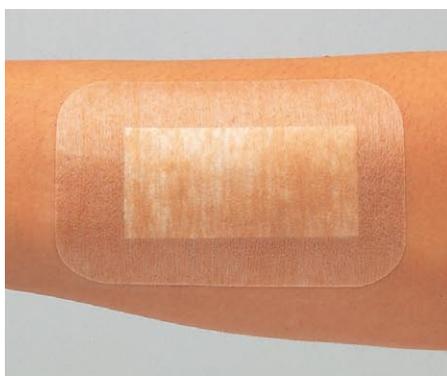

品番	種類	製品寸法		1箱入数
		パッド	粘着部	
4601	1号	2.5cm×3cm	5.0cm×5.0cm	100枚
4602	2号	3.0cm×4cm	5.0cm×7.2cm	50枚
4603	3号	3.0cm×6cm	6.0cm×10.0cm	50枚
4604	4号	5.0cm×7cm	10.0cm×12.5cm	20枚
4605	5号	5.0cm×10cm	10.0cm×16.0cm	20枚
4606	6号	5.0cm×15cm	10.0cm×20.0cm	20枚
4607	7号	5.0cm×20cm	10.0cm×25.0cm	20枚
4608	8号	5.0cm×25cm	10.0cm×30.0cm	20枚


届出番号 13B2X00187000024

多目的防水パッド

UNDER PAD C

アンダーパッド C

[多目的防水パッド]

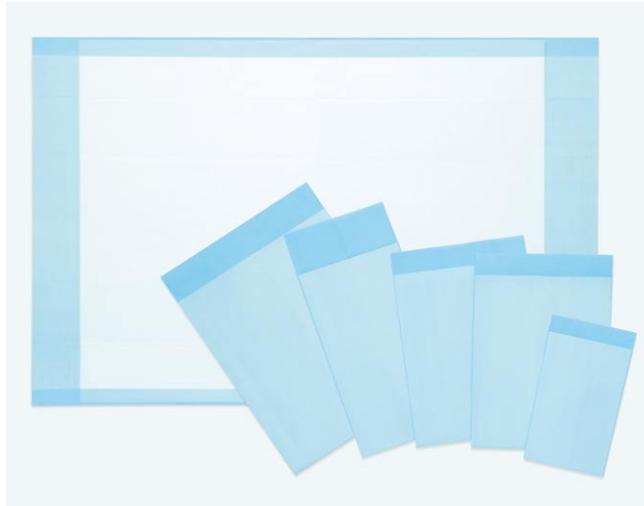

ディスプレイザブルタイプの防水パッド。

- ◎パッドを敷くときや交換する際の作業性を考えた折り方になっています。
- ◎オートクレーブ滅菌(設定温度126℃以下)ができます。
- ◎使用後はそのまま廃棄できますので、感染症対策にもなります。

主な用途

- 滲出液や出血の多く見られる分野での吸収・防水および汚れ防止。
- 体が不自由な方、寝たきりの方のオムツの補助パッドに。

品番	種類	寸法(幅×長さ)	1ケース入数	備考
512211	P4360	43cm × 60cm	300枚 (25枚×12袋)	
512213	P5888	58cm × 88cm	150枚 (25枚×6袋)	
512215	P7575	75cm × 75cm	150枚 (25枚×6袋)	
512217	SA7575	75cm × 75cm	100枚 (25枚×4袋)	高吸収タイプ
512219	P75178	75cm × 178cm	50枚 (25枚×2袋)	ベッドタイプ

日本シグマックス株式会社

本社:〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間:9時~17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く



※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。

日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。