



BASIC SUPPORTER

ベーシックサポーター

日本シグマックス株式会社

固定・保温サポーター



BASIC SUPPORTER

※本カタログの商品の中に天然ゴムを使用している商品がございます。
商品紹介欄に「天然ゴム使用(ラテックス含む)」このマークのついた商品はアレルギーにご注意ください。

頸椎固定用シーネ



カラーキーパー P3



カラーキーパー・U P3



カラーキーパー・ハード P4



カラーキーパー・me
(メッシュタイプ) P4

胸部固定帯



リブバンド P5



リブバンドⅡ P5



リブバンドフィット P6



リブバンド me
(メッシュタイプ) P6

膝関節固定帯



ニースプリント
〈伸展タイプ〉 P7



ニースプリント
〈屈曲タイプ〉 P8

鎖骨固定帯



クラビクルブレース P9

腰部・大腿部用サポーター



プレパンツ P9

医療用サポーター



ウールサポーター P10



シームレス
サポーター P10

頸椎固定用シーネ

カラーキーパー

COLLAR KEEPER

【主な用途】 頸部の固定



凹凸加工

2層構造の芯材

内側：ポリウレタンフォーム

外側：ポリエチレンフォーム

通気孔

オーバーカバーは
取り外して洗濯できます。



製品本体に2段階の高さ調節機能を付加し、フィット感を向上。

- ◎製品本体に内蔵した高さ調節シートにより、製品本体中心部で1cmずつ2段階で高さの調節ができます。
- ◎顎や首に当たる内側には柔らかいポリウレタンフォーム、外側は硬めのポリエチレンフォームの2種類の素材を貼り合わせ適度な固定とソフトな装着感を両立しました。
- ◎芯材のポリウレタンフォームに抗菌防臭・消臭加工を施し、生地には抗菌・消臭機能のある素材を使用しています。
- ◎本体を丸ごと手洗いできるため衛生的。オーバーカバーのみの洗濯も可能です。
- ◎製品の色を装着時に目立ちにくいグレーにしました。

高さ調節機能



品番	種類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
311000	SS	25cm～30cm	6.5cm～8.5cm	1コ
311001	S	30cm～35cm	7.0cm～9.0cm	1コ
311002	M	35cm～40cm	7.5cm～9.5cm	1コ
311003	L	40cm～45cm	7.0cm～9.0cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

カラーキーパー・U

COLLAR KEEPER・U

【主な用途】 頸部の固定



弾力性のあるポリウレタンフォームで頸部をソフトにサポート。

- ◎製品本体は首まわりに沿うようカットし、フィットしやすい形状です。
- ◎芯材は柔らかくても弾力性のあるポリウレタンフォームを使用し、頸部をソフトにサポートします。
- ◎芯材に通気孔を設け、ムレにくい設計です。
- ◎カバーには肌触りのよい綿素材を使用しています。
- ◎製品の色を装着時に目立ちにくいグレーにしました。



品番	種類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
311101	S	30cm～35cm	8.0cm	1コ
311102	M	35cm～40cm	8.5cm	1コ
311103	L	40cm～45cm	8.0cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

カラーキーパー・ハード

COLLAR KEEPER・HARD

【主な用途】 頸部の固定



頸にフィットして頸部をしっかり固定。高さ調節もOK。

- ◎首まわりの形状にフィットしやすい設計です。
- ◎2枚のシートを上下にずらして高さの微調整ができます。
- ◎面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式を採用しています。
- ◎芯材には通気孔を設けることでムレにくい仕様です。



外れにくいダブルストッパー方式

一方の面ファスナーをもう一方の面ファスナーで挟み込んでとめるダブルストッパー方式のため外れにくい設計です。

品番	種類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
311211	S	30cm～35cm	8.0cm～ 9.5cm	1コ
311212	M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ
311213	L	40cm～45cm	8.0cm～ 9.5cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は高さの合う方のサイズを選んでください。

成形副木(JMDNコード:35354000) / 一般医療機器
医療機器届出番号:13B2X00187000027

カラーキーパー・me (メッシュタイプ)

COLLAR KEEPER・me

【主な用途】 頸部の固定



装着時の快適性を重視した、ムレにくいメッシュ仕様。

- ◎通気性に優れたメッシュ素材を採用しました。
- ◎2枚のシートを上下にずらして高さの微調整ができます。
- ◎面ファスナーのとめ部分は外れにくいダブルストッパー方式を採用しています。



外れにくいダブルストッパー方式

一方の面ファスナーをもう一方の面ファスナーで挟み込んでとめるダブルストッパー方式のため外れにくい設計です。

品番	種類	適用範囲(首まわり)	高さの目安(製品本体中心)	1箱入数
311301	S	30cm～35cm	8.0cm～ 9.5cm	1コ
311302	M	35cm～40cm	8.5cm～10.0cm	1コ
311303	L	40cm～45cm	8.0cm～ 9.5cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。計測値が2サイズのさかいになった場合は高さの合う方のサイズを選んでください。

胸部固定帯

リブバンド

RIB BAND

【主な用途】 胸部の圧迫・固定



(一般用)



(女性用)

胸部のフィット性に優れた汎用タイプ。女性用は乳房を圧迫しない形状。

- ◎腋窩部に当たりにくい形状で上位肋骨も的確に固定します。
- ◎背部の伸縮部分は下部にかけて幅を狭くすることでフィット性を向上させています。
- ◎本体生地には、通気性が良く、抗菌防臭・消臭加工を施した素材を採用しました。
- 肌当たる面は肌触りの良いソバイル地を使用しています。
- ◎前合わせ部分にポケット状の装着機構を付けることでスムーズな装着が可能です。
- ◎女性用は乳房を圧迫しない形状です。



● 腋窩部に当たりにくい形状で、上位肋骨も的確に固定。



前合わせ部の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく装着しやすい設計。

品番	種類	適用範囲	1箱入数
313000	SS	55cm～ 70cm	1コ
313001	S	70cm～ 85cm	1コ
313002	M	85cm～100cm	1コ
313003	L	100cm～120cm	1コ
313004	LL	120cm～140cm	1コ
313005	3L	140cm～160cm	1コ
313102	M	60cm～ 75cm	1コ
313103	L	75cm～ 90cm	1コ
313104	LL	90cm～105cm	1コ
313105	3L	105cm～120cm	1コ

※一般用は胸囲、女性用はアンダーバストを計測してください。胸囲は腋下の高さの胸囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

リブバンド II

RIB BAND II

【主な用途】 胸部の圧迫・固定



肌あたりのいい素材を使用し、フロント2分割構造で圧迫力の調節が可能。

- ◎前合わせ部を2分割構造にし、圧迫力の微調節が可能です。
- ◎腋窩部に当たりにくい形状で上位肋骨も的確に固定します。
- ◎本体生地には、通気性が良く、抗菌防臭・消臭加工を施した素材を採用しました。
- 肌当たる面は肌触りの良いソバイル地を使用しています。
- ◎前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。



● フロントに2分割構造を採用し、圧迫力の微調節が可能。



前合わせ部の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく装着しやすい設計。

品番	種類	適用範囲 (胸 囲)	1箱入数
313201	S	70cm～ 85cm	1コ
313202	M	85cm～100cm	1コ
313203	L	100cm～120cm	1コ
313204	LL	120cm～140cm	1コ

※胸囲に合わせて選んでください。胸囲は腋下の高さの胸囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

リブバンドフィット

RIB BAND FIT

【主な用途】胸部の圧迫・固定




フロント2分割構造で圧迫力の調節が可能。
メッシュ素材でかさばりをおさえた快適な装着感。

- ◎前合わせ部を2分割構造にし、圧迫力の微調節が可能でフィットしやすい形状です。
- ◎前合わせ部に薄いメッシュ素材を採用し、かさばりを軽減しました。
- ◎サポーター本体の生地には抗菌・防臭加工を施した通気性の良い素材を使用しています。
- ◎前合わせ部両端にポケット状の装着機構を採用し、つかみやすく引っ張りやすい形状です。
- ◎本体と伸縮ストラップの結合部分をV字形状にし、製品の上下端の圧迫力を高めることでズレ落ちにくい設計です。

V字カット形状

本体と伸縮ストラップの結合部分をV字形状にし、製品上下端の圧迫力を高めることで、ずれ落ちにくい設計。

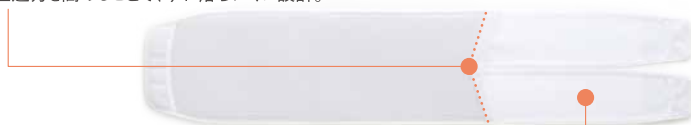

2分割構造

前合わせ部に2分割構造を採用しました。体型や症状に合わせた圧迫力の微調整が可能で、フィットしやすい形状。



前合わせ部の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく装着しやすい設計。

品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1箱入数
313401	S	60cm～ 80cm	1コ
313402	M	80cm～100cm	1コ
313403	L	100cm～120cm	1コ
313404	LL	120cm～140cm	1コ
313405	3L	140cm～160cm	1コ

※胸囲に合わせて選んでください。胸囲は腋下の高さの胸囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

リブバンド me (メッシュタイプ)

RIB BAND me

【主な用途】胸部の圧迫・固定



装着感を重視したメッシュタイプ。

- ◎本体生地には通気性と吸汗性のあるメッシュ素材を採用。また、ゴワつきのないメッシュ素材を採用しています。
- ◎肌に当たる面にはソフトタッチの綿パイル地を使用しています。
- ◎前合わせ部の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく装着しやすい設計です。



前合わせ部の両端部に持ちやすいポケット状の装着機構を採用し、握力の弱い方でもつかみやすく装着しやすい設計。

品番	種類	適用範囲 (胸囲)	1箱入数
313301	S	70cm～ 85cm	1コ
313302	M	85cm～100cm	1コ
313303	L	100cm～120cm	1コ
313304	LL	120cm～140cm	1コ

※胸囲に合わせて選んでください。胸囲は腋下の高さの胸囲を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は大きい方のサイズを選んでください。

ニースプリント 〈伸展タイプ〉

KNEE SPLINT


〔主な用途〕 膝部疾患時の固定、膝関節手術後・リハビリテーション時の固定




伸展位で、膝関節を的確に固定。

- ◎アルミ製のステーを両サイドに1本ずつ、膝裏には2本配置。必要に応じてステーを変形、取り外しができます。
- ◎面ファスナーの蓋がステーの飛び出しを防止する設計です。
- ◎側面ステーの位置を前後に微調整することができます。
- ◎膝裏には通気性の高い生地を採用し、快適な装着感です。
- ◎仮どめ面ファスナーで楽に装着できます。


両サイドと膝裏にアルミステーを配置。

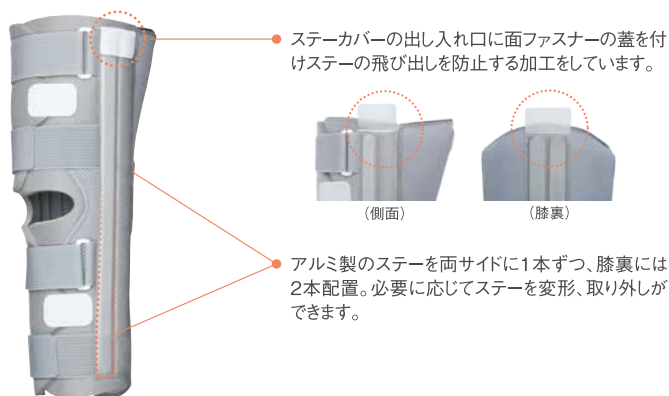

微調整できるステーへの工夫。

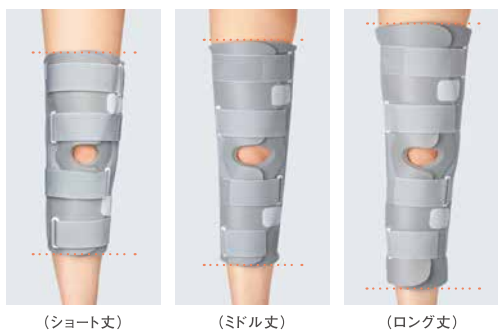


- ◎さまざまな使用状況や体型に対応するために、豊富なサイズバリエーションを揃えました。
- ◎特に大腿周囲41～53cmの場合では、丈の長さが異なる「ショートM・L」(伸展タイプのみ)、「M・L」と「ロングM・L」を用意しています。

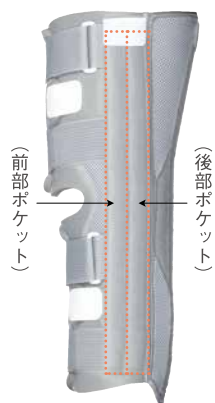

- ◎側面ステーを納める筒状のポケット(側面ステーカバー)を、本体両サイドに2つ並列させています。1本のステーをどちらに挿入するかで、ステーの位置を前後に微調整できます。
- ◎膝裏のステーは、強度の高いアルミステーを使用。患者さんの足の形状に合わせて加工ができます。


膝裏部のフィット性を向上。

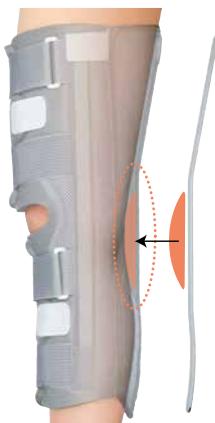

- ◎本体後面の膝裏部分にクッション材を追加しました。膝裏のフィット性が向上し、膝裏ステーによる局所的な圧迫をやわらげます。



装着時に便利、仮どめ面ファスナー。

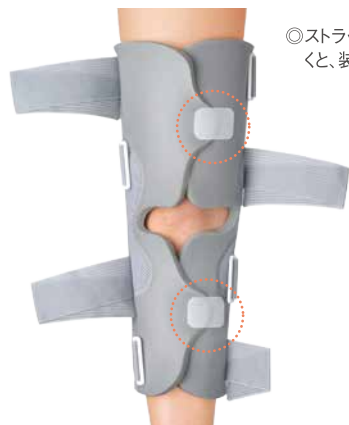

◎ストラップを着ける前に、ちょっと仮どめしておくと、装着がラクになります。

本体後面には通気性の高い生地を採用。



◎本体後面およびパッド部は、通気性の高い素材を使用しました。ムレにくく、肌触りもよく快適な装着感です。



品番	種類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1箱入数
301001	S	48.5cm	33cm～41cm	26cm以上	1コ
301002	M・L	48.5cm	41cm～53cm	26cm以上	1コ
301012	ロングM・L	52.0cm	41cm～53cm	29cm以上	1コ
301014	ロングLL	52.0cm	53cm～65cm	29cm以上	1コ
301021	ショートS	41.5cm	33cm～41cm	19cm以上	1コ
301022	ショートM・L	41.5cm	41cm～53cm	19cm以上	1コ

※大腿周囲を基準に選んでください。

大腿周囲は膝蓋骨の中心から10cm上を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品丈は股下の大腿長を参考に使用状況に合わせて選んでください。

股下の大腿長は、膝蓋骨中心から股の高さまでの長さを計測してください。

ニースプリント〈屈曲タイプ〉

KNEE SPLINT

〔主な用途〕膝部疾患時の固定、膝関節手術後・リハビリテーション時の固定



軽度屈曲位で、膝関節を的確に固定。

- ◎ニースプリント伸展タイプの機能を持ち、軽度屈曲位で、膝関節を的確に固定します。
- ◎予め軽度屈曲位に加工したアルミ製のステーを両サイドに1本ずつ、膝裏には2本配置。必要に応じてステーを変形、取り外しができます。
- ◎面ファスナーの蓋がステーの飛び出しを防止する設計です。
- ◎側面ステーの位置を前後に微調整することが可能です。
- ◎膝裏には通気性の高い生地を採用し、快適な装着感です。
- ◎仮どめ面ファスナーで楽に装着できます。

品番	種類	製品丈	適用範囲 (大腿周囲)	適用参考値 (大腿長)	1箱入数
301101	S	48.5cm	33cm～41cm	26cm以上	1コ
301102	M・L	48.5cm	41cm～53cm	26cm以上	1コ
301112	ロングM・L	52.0cm	41cm～53cm	29cm以上	1コ
301114	ロングLL	52.0cm	53cm～65cm	29cm以上	1コ

※大腿周囲を基準に選んでください。

大腿周囲は膝蓋骨の中心から10cm上を計測してください。

計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。

※製品丈は股下の大腿長を参考に使用状況に合わせて選んでください。

股下の大腿長は、膝蓋骨中心から股の高さまでの長さを計測してください。

鎖骨固定帯

クラビクルブレース

CLAVICLE BRACE

〔主な用途〕 鎖骨骨折時の整復後の固定



圧迫感を和らげる、厚手のクッション材。

- ◎腋窩の圧迫を軽減した形状です。
- ◎ストラップクッションの角度を肩幅に合わせて微調節できます。
- ◎アジャスターと面ファスナーでしっかりとめるダブルストッパー構造です。
- ◎背当てにプラスチックステーを入れ、よれにくくしています。
- ◎3SからLLサイズまでの幅広いサイズ構成です。



品番	種類	参考適用範囲		1箱入数
		男性(胸囲)	女性(アンダーバスト)	
15601	3S	40cm～ 50cm	40cm～ 50cm	1コ
15602	SS	50cm～ 60cm	50cm～ 60cm	1コ
15603	S	60cm～ 70cm	60cm～ 65cm	1コ
15604	M	70cm～ 85cm	65cm～ 80cm	1コ
15605	L	85cm～ 115cm	80cm～ 115cm	1コ
15606	LL	115cm～ 150cm	115cm～ 150cm	1コ

※男性は胸囲、女性はアンダーバストを計測してください。

腰部・大腿部用サポーター

プレパンツ

PREPANTS

〔主な用途〕 人工関節の術後、植皮術後などの腰部、大腿部の圧迫



圧迫力の調節が可能。

- ◎腰部と大腿部の側面にそれぞれ2本の面ファスナーを配置し、圧迫力の調節を可能にしました。
- ◎サポーター本体には、弾力性とフィット性のある生地を使用しています。
- ◎吸水性、透湿性に富み、肌触りのよい素材です。
- ◎左右兼用です。



◀ 2本の面ファスナーで、容易に着脱。
圧迫力の調節もできます。

品番	種類	適用範囲		1箱入数
		(ヒップ周囲)	(大腿周囲)	
17001	S	60cm～ 75cm	40cm～45cm	1コ
17002	M	75cm～ 90cm	45cm～51cm	1コ
17003	L	90cm～110cm	51cm～58cm	1コ
17004	LL	110cm～130cm	58cm～65cm	1コ

※ヒップ周囲を基準とし大腿周囲は目安としてください。

医療用サポーター

ウールサポーター

WOOL SUPPORTER

[主な用途] 関節の保温・圧迫



ウールならではの優れた保温性。

- ◎関節の保温・圧迫用サポーターです。
- ◎縦横両方向に伸び、患部にやさしくフィットします。
- ◎ウール混紡です。



天然ゴム使用 (ラテックス含む)

品番	種類	適用範囲	1袋 入数	1箱 入数
301301	ひじS	20cm～25cm	1枚	6袋
301302	ひじM・ひざS	23cm～30cm	1枚	6袋
301303	ひじL・ひざM	30cm～40cm	1枚	6袋
301304	ひざL	40cm～50cm	1枚	6袋
301305	ひざM(ロング)	30cm～40cm	1枚	6袋
301306	手のひら	—	1枚	6袋
301307	手くび	17cm～23cm	2枚	6袋
301308	足くび	(靴サイズ) 23cm～27cm	1枚	6袋

※ひじは肘頭から10cm上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から12cm上の周囲を目安にしてください。
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

シームレスサポーター

SEAMLESS SUPPORTER

[主な用途] 関節の保温・圧迫



肌触りに優れたエコノミータイプ。

- ◎関節の保温・圧迫用サポーターです。
- ◎吸湿性と肌触りの良い素材を使用しています。
- ◎様々な用途に幅広く対応する医療用サポーターです。



天然ゴム使用 (ラテックス含む)

品番	種類	適用範囲	1袋 入数	1箱 入数
301401	手くび	15cm～20cm	2枚	6袋
301402	手のひら	—	1枚	6袋
301403	ひじ	20cm～25cm	1枚	6袋
301404	ひざ	35cm～45cm	1枚	6袋
301405	足くび	(靴サイズ) 23cm～27cm	1枚	6袋
301406	すね	25cm～35cm	1枚	6袋
301407	もも	45cm～55cm	1枚	6袋

※ひじは肘頭から10cm上の周囲、ひざは膝蓋骨中心から12cm上の周囲を目安にしてください。
足くびの適用範囲は靴のサイズを目安にしてください。

日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。
日本シグマックスのホームページ <http://www.sigmax.co.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。