


## 頸部固定帯

# カラーキーパー

製品情報は  
こちらからも  
ご覧いただけます。



主な用途：頸部の固定

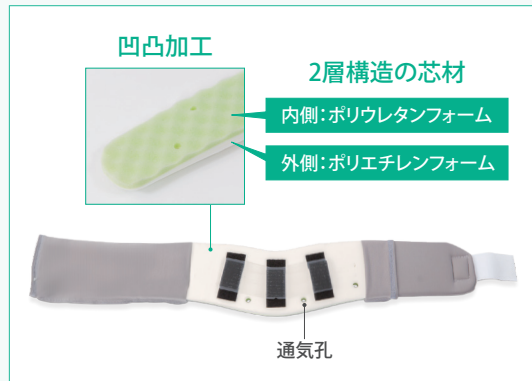


### 特長

製品本体に2段階の高さ調節機能を付加し、フィットしやすい頸部固定帯。

- 製品本体に内蔵した高さ調節シートにより、製品本体中心部で1cmずつ2段階で高さ調節が可能です。
- 顎や首に当たる内側には柔らかいポリウレタンフォーム、外側は硬めのポリエチレンフォームの2種類の素材を貼り合わせ適度な固定とソフトな装着感を両立しました。
- 芯材のポリウレタンフォームに抗菌防臭・消臭加工を施し、生地には抗菌・消臭機能のある素材を使用しています。
- 本体を丸ごと手洗いでできるため衛生的。オーバーカバーのみの洗濯もできます。
- 製品の色は装着時に目立ちにくいグレーにしました。

### 高さ調節について

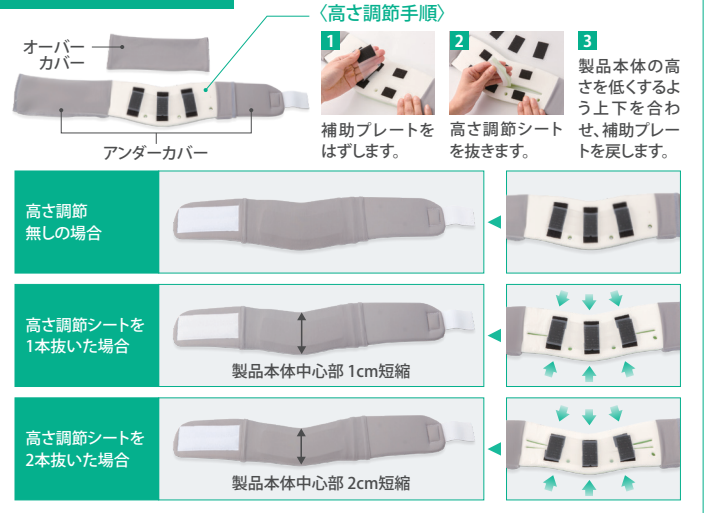

品番	種類	適用範囲 (首まわり)	高さの目安 (製品本体中心)	1箱入数
311000	SS	25cm～30cm	6.5cm～8.5cm	1コ
311001	S	30cm～35cm	7.0cm～9.0cm	1コ
311002	M	35cm～40cm	7.5cm～9.5cm	1コ
311003	L	40cm～45cm	7.0cm～9.0cm	1コ

※首まわりに合わせて選んでください。

## 日本シグマックス株式会社

本社：〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1  
 お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)  
 受付時間：9時～17時(平日) ※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。

<https://www.sigmax-med.jp/>



- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。