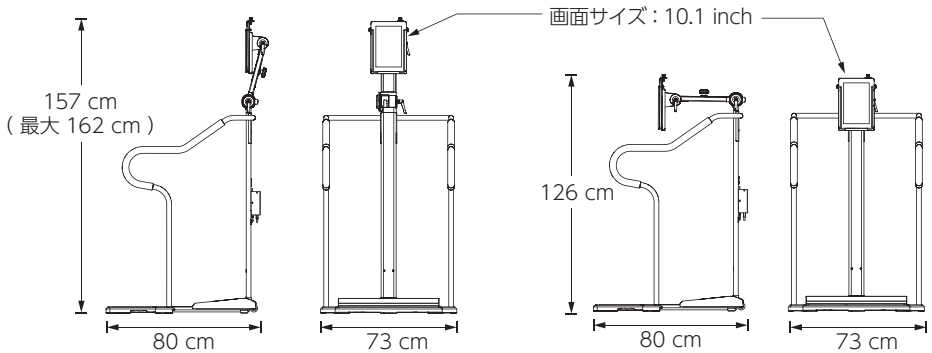


主な仕様

品名〈品番〉		デジタルバランストレーナー（立位／座位） 〈PN-S3129010〉	デジタルバランストレーナー（立位） 〈PN-S3119010〉
セット内容		本体+立位バランス計+座位バランス計	本体+立位バランス計
メーカー希望小売価格		1,500,000円（税抜）	1,300,000円（税抜）
本 体	品番	PN-S3120010	PN-S3110010
	電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
	消費電力	タブレット 約 3 W（最大 40 W） 注）製造メーカーの仕様変更や他社製品への切換えにより機種を変更する場合があります。	
	質量	約 46.6 kg（座位バランス計含む）	約 42 kg
	外形寸法		
同梱品		取扱説明書、保証書、タブレットACコード（90 cm）、AC延長コード（3 m）	

バ ラ ン ス 計	品名	立位バランス計	座位バランス計
	品番	PN-S3110020	PN-S3010030
	質量	約 6.6 kg	約 4.6 kg
	最大適応体重	100 kg	100 kg
	外形寸法	幅：53.6 cm 奥行：43.6 cm	幅：40 cm 奥行：37 cm コード長さ：約 3 m

注意：デジタルバランストレーナー（立位）を購入後に、座位バランス計を追加する場合はソフトのバージョンUPの手数料も別途発生します。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、
取扱説明書を
よく読みのうえ
正しくお使いく
ださい。

- この商品はリハビリを目的とした訓練・測定ができる機器です。（医療機器ではありません）
- 使用前に医師や療法士と相談の上使用する。
- 訓練を安全に行える十分なスペースを確保し、水平な固い床上で使用する。
- 転倒の恐れがある人やからだが不自由な人が使用される場合は、必ず介助者が付き添って使用する。
- 使用中にからだに異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、医師や療法士に相談する。

保証書に
関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保存ください。
尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

補修性能
部品保有期間

- デジタルバランストレーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

ご購入に
あたって

- 本カタログのメーカー希望小売価格には、配送・設置調整費・部材・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

お求めは当店にて

パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
エイジフリービジネスユニット

〒571-8686
大阪府門真市大字門真1048番地
TEL. (06) -6903-1205

© Panasonic Corporation 2015
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2015年7月現在のものです。

201508-5YL

商品については、ホームページでご確認できます。 <http://panasonic.biz/healthcare/elderlycare>

Panasonic

Homes & Living

病院・施設向け **リハビリ** ナビゲーションシステム

デジタルバランストレーナー

2015年8月



パナソニックの
エイジフリー

エイジフリーはパナソニック、パナホームが取り組む
高齢者・介護事業のブランドです。

転倒予防に効果的なバランス訓練と測定が手軽にできる。



タッチパネルで
簡単操作!

座位トレーニング
にも対応!



Digital Balance Trainer

デジタルバランストレーナー

手軽に楽しくバランストレーニング!

バランス訓練では、自分の体重がかかる運動(立位で行う)がポイントです。
個々の心身の特徴を把握しつつ、無理なく楽しく継続することが必要です。

- 1 簡単に楽しく
バランス訓練!
- 2 測定結果を
訓練にいかせる!
- 3 コンパクトで
省スペース化を実現!



安定した姿勢で
訓練ができる
サイドハンドル
を標準装備。

立位バランス計



本格的なバランストレーニング

映像を見ながら、
本格的なバランス訓練
ができます。

- バランス保持
- 左右重心移動
- 金魚すくい
- 重心訓練
- 足踏み運動

トレーニングメニュー

バランス保持
左右の重心割合を
設定し保持する訓練。

左右重心移動
左右の重心の移動を
ゆっくりコントロール。

金魚すくい
重心を移動させてポイを
動かし、金魚をすくいます。

重心訓練
任意に設定したフルーツ
を重心移動で獲得。

足踏み運動
クイズに答えながら
足踏み運動します。

便利な連続訓練

自動的にメニューが続き、連続してトレーニングできます。

ランダムコースの例

1 保持コース(立) 4分
2 左右コース(立) 6分
3 クロスコース(立) 8分
4 ランダムコース(立) 5分
5 保持コース(座) 4分
6 左右コース(座) 6分
7 クロスコース(座) 8分
8 ランダムコース(座) 5分

スタート

バランス保持
2分

金魚すくい
1分

金魚すくい
1分

足踏み運動
1分



らくらく測定

バランス能力の測定結果を
訓練にいかせます。

バランス測定メニュー

開眼片足立ち
ストップウォッチを
使わず簡単測定!

Timed Up & Go
座位バランス計を
使用して測定します。

重心軌跡長
バランス能力を
数値化!

分かりやすく 比較

個人別に保存したデータを活用し、
過去と現在の測定結果をグラフ
などで比較できます。また、訓練
などの使用履歴を確認すること
もできます。

分かりやすくリハビリ効果をフィードバック

その場ですぐに!
測定後、
すぐに結果比較!

タブレットを持ち出して!
施設のテーブル席や
担当者会議で!

レポート
測定結果を印刷
ケアマネジャーや
ご家族への
報告資料に!

【非売品】
注意:エクセルのバージョン
等によって対応しないこと
があります。

測定結果を印刷
ケアマネジャーや
ご家族への
報告資料に!